




# ORagene®DNA

REF OG-500 og OG-510

REF OG-600 og OG-610

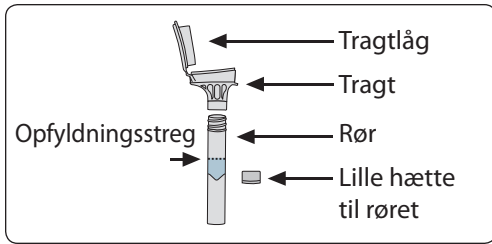

### Forholdsregler ved indsamling:

**UNDLAD at spise, drikke, ryge eller tygge tyggegummi i 30 minutter inden afgivelse af spytpøven.**

**Fjern IKKE plastfilmen fra tragtens låg.**

**Tilsigtet anvendelse:** Til indsamling af menneskelig DNA fra spytpøve.

**Indhold:** Sættet indeholder stabiliserende væske.

**Advarsler og forholdsregler:** Skyl med vand hvis den stabiliserende væske kommer i kontakt med øjne eller hud. Må ikke indtages. Se Sikkerhedsdatablad på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Lille hætte, kvælningsfare.

**Opbevaring:** 15°C / 30°C

### Resumé og forklaring af sættet:

Oragene-DNA er et sæt til selv-indsamling, der leverer materialerne og vejledningen til at indsamle og stabilisere spytpøve.

### Symbolforklaring:


	Se indlægsseddel
	Spyt skal opsamles inden (Anvendes inden)
	Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
	Katalognummer
	CE-mærkning
	Forsigtig, se brugsvejledningen
	Opbevaringsvejledning
	Autoriseret repræsentant
	Fabrikant
	Partinummer

## BRUGERVEJLEDNING


Læs alle vejledninger inden indsamling

### Procedure:


**De fleste personer er mellem 2 og 5 minutter om at komme med en spytpøve, når de følger trin 1 til 5.**

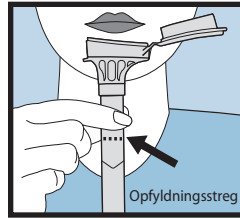


**1** Spyt ind i tragtens indtil mængden af flydende spyt (uden bobler) når "opfyldningslinjen" vist på billede #1.

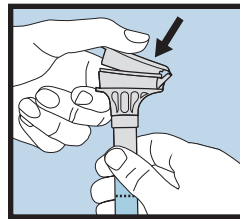


**2** Hold røret lodret med en hånd. Luk låget med den anden hånd (som vist) ved at trykke fast ned på låget, indtil du hører et højt klik. Væsken i låget vil blive frigjort ind i røret og vil blande sig med spyttet. Sørg for, at låget er lukket tæt.

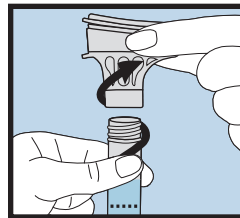

**3** Hold røret lodret. Skru tragtens af røret.

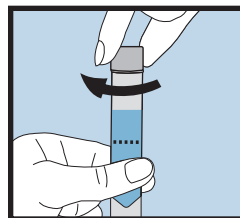

**4** Brug den lille hætte til at lukke røret tæt til.

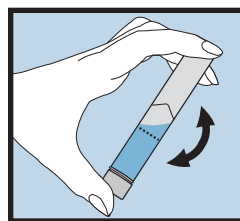

**5** Ryst røret med hættens påsat i 5 sekunder. Kassér tragtens eller aflever den til genbrug.



Til brug ved in vitro diagnostik

**DNAgenotek**



Fremstillet i Canada  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Bedre prøver  
Dokumenteret opnået resultat*

Tlf: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®-DNA sælges ikke i USA.

\*Oragene er et indregistreret varemærke tilhørende DNA Genotek Inc.

Nogle DNA Genotek produkter forhandles muligvis ikke i alle geografiske regioner. Kontakt din salgsrepræsentant for nærmere oplysninger.

Alle DNA Genotek-protokoller, -hvidbøger og -anvendelsesnoter findes på vores webside [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) under support.

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2017 DNA Genotek Inc., et datterselskab af OraSure Technologies, Inc., alle rettigheder forbeholdt.  
PD-PR-00293 (DA - Danish) Issue 3/2017-02