




ORagene®DNA

REF OG-500 en OG-510

REF OG-600 en OG-610

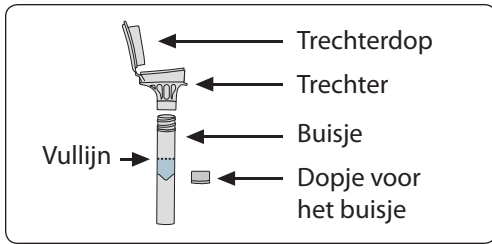

Voorzorgen bij afname:

Voordat u uw speekselmonster afstaat mag u 30 minuten daarvoor NIET eten, drinken, roken of kauwgom kauwen.

De dunne plastic film NIET van de trechterdop verwijderen.

Beoogd gebruik: Voor het verzamelen van menselijk DNA uit speekselmonsters.

Inhoud: Kit bevat stabilisatievloeistof.

Waarschuwingen en voorzorgen: Met water spoelen indien de stabilisatievloeistof met de ogen of huid in contact komt. Niet inslikken. Raadpleeg MSDS op www.dnagenotek.com.

Kleine dop, verstikkingsgevaar.

Opslag: 15°C / 30°C

Samenvatting en toelichting op de kit:

Oragene-DNA is een zelfverzamelingsset die de materialen en instructies bevat voor het verzamelen en stabiliseren van speekselmonsters.

Labelopschrift:


	Raadpleeg de bijsluiters in de verpakking
	Verzamel speeksel niet later dan (Gebruik niet later dan)
	Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnostiek
	Catalogusnummer
	CE-markering
	Voorzichtig, raadpleeg vóór gebruik de instructies
	Opslaginstructies
	Erkende vertegenwoordiger
	Fabrikant
	Lotnummer

GEBRUIKSINSTRUCTIES


Lees vóór de afname alle instructies

Procedure:


Bij de meeste mensen duurt het tussen 2 en 5 minuten om een speekselmonster te geven volgens stappen 1 t/m 5.

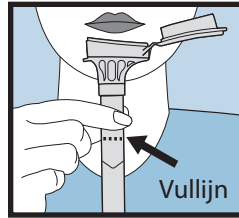


- 1 Spuw in de trechter totdat de hoeveelheid speekselvloeistof (geen belletjes) de in afbeelding 1 getoonde vullijn (fill line) bereikt.

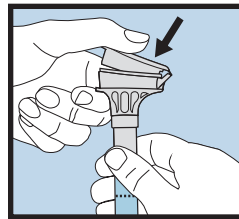


- 2 Houd het buisje met de ene hand rechtop. Sluit met de andere hand het buisje af met de dop (zoals afgebeeld) door stevig op de dop te drukken totdat u een luide klik hoort. De vloeistof in de dop loopt het buisje in en mengt zich met het speeksel. Zorg ervoor dat de dop stevig gesloten is.

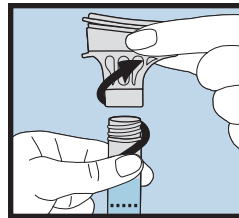

- 3 Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter van het buisje af.

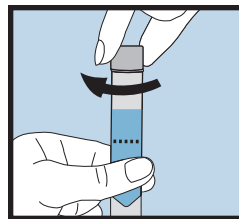

- 4 Gebruik het dopje om het buisje stevig te sluiten.

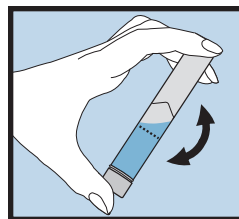

- 5 Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden. Gooi de trechter weg of recycleer hem.



Uitsluitend voor in vitro diagnostisch gebruik

DNAgenotek



*Superieure monsters
Bewezen resultaten*

Geproduceerd in Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®DNA wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

*Oragene is een gedeponeerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.

Sommige DNA Genotek producten zijn mogelijk niet in alle geografische regio's verkrijgbaar, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

Alle DNA Genotek producten, technische documentatie en toepassingsaantekeningen, zijn beschikbaar in het onderdeel 'support' van onze website op www.dnagenotek.com.

Octrooi (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.
PD-PR-00294 (NL - Dutch) Issue 3/2017-02