


## INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Lea todas las instrucciones antes de la recolección

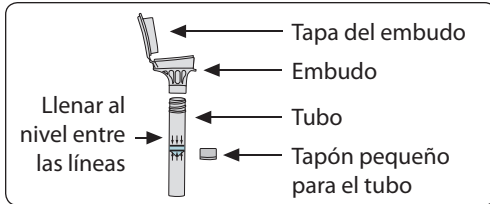

### Precauciones para la recolección:

**NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique goma de mascar 30 minutos antes de obtener su muestra de saliva.**

**NO quite la película plástica de la tapa del embudo.**

**Al escupir, la saliva NO debe sobrepasar la línea superior del tubo (figura 1).**

**Uso previsto:** Para la recolección de ADN humano de muestras de saliva.

**Contenido:** El kit contiene líquido estabilizador.

**Advertencias y precauciones:** Enjuague con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).




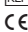






Tapón pequeño, peligro de asfixia.

**Almacenamiento:** 15°C / 30°C

### Resumen y explicación del kit:


Oragene-ONE es un kit de autorrecolección que contiene los materiales y las instrucciones para recolectar y estabilizar muestras de saliva.

### Leyenda de la etiqueta:


	Consulte el prospecto del paquete
	Recoja la saliva antes del (fecha de caducidad)
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Número de catálogo
	Marca CE
	Precaución: consulte las instrucciones de uso
	Instrucciones de almacenamiento
	Representante autorizado
	Fabricante
	Número de lote

### Procedimiento:


**A la mayoría de las personas les lleva entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 5.**

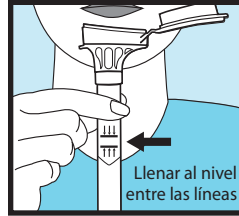


- 1 Escupa una cantidad PEQUEÑA de saliva en el embudo. Golpee suavemente la base del tubo sobre una superficie plana para ayudar a que la saliva se desplace por el tubo. Verifique que el nivel de saliva (no de burbujas) se encuentre entre las líneas que se muestran en la figura n.º 1.

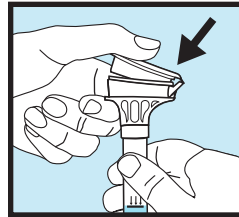


- 2 Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra), empujándola con firmeza hasta que escuche un chasquido fuerte. El líquido coloreado de la tapa pasará al tubo para mezclarse con la saliva. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.

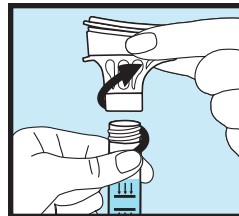

- 3 Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

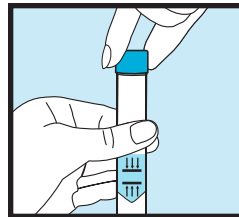

- 4 Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo herméticamente.

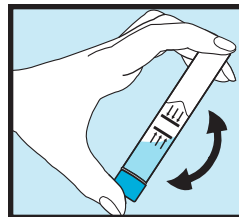

- 5 Agite el tubo tapado durante 5 segundos. Deseche o recicle el embudo.



Para diagnóstico in vitro

**DNAgenotek**



Fabricado en Canadá  
 DNA Genotek Inc.  
 3000 - 500 Palladium Drive  
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Muestras de calidad superior  
 Resultados de eficacia comprobada*

Tel: +1.613.723.5757  
 Fax: +1.613.723.5057  
 info@dnagenotek.com  
 www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene-ONE no está disponible para la venta en Estados Unidos.

\*Oragene es una marca registrada de DNA Genotek Inc.

Es posible que no todos los productos de DNA Genotek estén disponibles en todas las regiones geográficas.

Contacte con su representante de ventas para obtener más información.

Todos los protocolos, reportes técnicos y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección "Support" de nuestro sitio web en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patente ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2017 DNA Genotek Inc., una subsidiaria de OraSure Technologies, Inc., todos los derechos reservados.

PD-PR-00330 (ES - Spanish) Issue 3/2017-11