

### Mjere opreza pri prikupljanju:

**NEMOJTE odstraniti plastičnu foliju s poklopca lijevka.**

**Svaki put prije stavljanja spužve u usta davatelja, provjerite njezinu ispravnost. Koristite drugu spužvu ako prva pokazuje bilo kakve znakove habanja ili trošnosti.**

**NE zamjenjujte drugim spužvama ili tupferima.**

**Svrha uporabe:** za potpomognuto prikupljanje ljudske DNK iz uzoraka sline.

**Sadržaj:** komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

### Upozorenje i mjere opreza:

#### Opasnost od gušenja:

- Mali čep u kompletu za prikupljanje.
- Plastična vrećica koja sadrži spužve.
- Budite oprezni pri stavljanju spužve u usta davatelja.

#### Za prikupljanje uz nadzor:






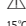




- NE ostavljajte davatelja bez nadzora.
- NE dopuštajte davatelju rukovanje spužvom, malim čepom ili pakiranjem.
- Isperite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Vidi sigurnosno-tehnički list na [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Čuvanje:** 15°C / 30°C

### Sažetak i pojašnjenje kompleta:

Oragene-DNA je komplet za potpomognuto prikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje i stabilizaciju uzoraka sline.

### Objašnjenje oznake:

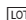	Proučite upute za primjenu
	Prikupljanje sline od strane (uporaba od strane)
	In vitro dijagnostički medicinski uređaj
	Kataloški broj
	CE označavanje
	Oprez, proučite upute za uporabu
	Upute za čuvanje
	Ovlašteni predstavnik
	Proizvođač
	Broj šarže

## UPUTE ZA UPORABU


Prije prikupljanja pročitajte kompletne upute.

### Postupak:


**Davatelj NE smije jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije prikupljanja uzorka sline.**

**Tijekom prikupljanja uzorka davatelj treba biti u uspravnom položaju.**


**Prikupljanje uzorka sline može potrajati do 15 minuta ako se slijede koraci od 1 do 7.**

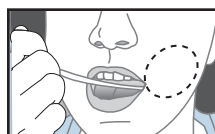

- 1 Stavite jednu spužvu u unutarnju stranu obraza. Nježno pomičite spužvu po desnim i unutarnjoj strani obraza 30 sekundi kako bi upila što je moguće više sline.

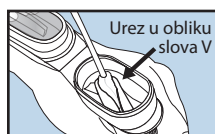


- 2 Kad se spužva natopi slinom, umetnite je u urez lijevka u obliku slova v. Iscijedite slinu iz spužve stiskanjem ili pritiskom na unutarnju stijenku ureza u obliku slova v. Slina će isteći u epruvetu.

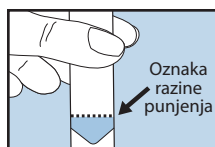


- 3 Ponovite te korake (1 do 2) KORISTEĆI ISTU SPUŽVU dok tekuća slina (ne mjehurići) ne dosegne oznaku. Svaki put prije stavljanja spužve u usta davatelja provjerite njezinu ispravnost. Koristite drugu spužvu ako prva pokazuje bilo kakve znakove habanja ili trošnosti.


Kucajte dnom epruvete o čvrstu podlogu kako biste smanjili broj mjehurića.

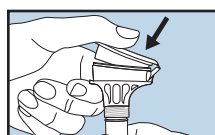

- 4 Držite epruvetu uspravno jednom rukom. Zatvorite poklopac drugom rukom (kao što je to prikazano) čvrsto ga gurajući dok ne čujete glasan klik. Tekućina se iz poklopca ispušta u epruvetu radi miješanja s uzorkom. Poklopac čvrsto zatvorite.

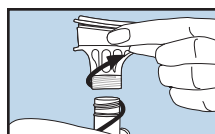

- 5 Držite epruvetu uspravno. Otvrnite lijevak s epruvete.

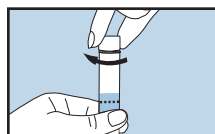

- 6 Malim čepom čvrsto zatvorite epruvetu.



- 7 Protresajte začepljenu epruvetu 5 sekundi. Bacite lijevak i spužve.



Za in vitro dijagnostičku uporabu

**DNAgenotek**



Proizvedeno u Kanadi  
 DNA Genotek Inc.  
 3000 - 500 Palladium Drive  
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Vrhunski uzorci*

*Dokazana učinkovitost*

Tel: +1.613.723.5757  
 Faks: +1.613.723.5057  
 info@dnagenotek.com  
 www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene-DNA nije u prodaji u Sjedinjenim Američkim Državama.

\*Oragene je registrirani zaštitni znak kompanija DNA Genotek Inc.

Neki proizvodi kompanija DNA Genotek Inc. nisu dostupni u svim zemljopisnim regijama, za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku.

Svi proizvodi od DNA Genotek, informativne publikacije i naputci o primjeni dostupni su u odijelu za tehničku podršku na našoj mrežnoj stranici [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2017 DNA Genotek Inc., podružnica kompanije OraSure Technologies Inc., sva prava zadržana.  
 PD-PR-00367 (HR - Croatian) Issue 2/2017-11