

Mjere opreza pri prikupljanju:

NE smijete jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije davanja svog uzorka.

NEMOJTE odstraniti plastičnu foliju s poklopca lijevka.

Sadržaj: komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

Upozorenje i mjere opreza:

Isperite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati.

Vidi sigurnosno-tehnički list na www.dnagenotek.com.



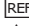
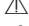
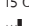

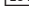
Mali čep predstavlja opasnost od gušenja.

Čuvanje: 15°C / 30°C

Sažetak i pojašnjenje kompleta:

OMNigene®-ORAL je komplet za prikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje i stabilizaciju mikrobne RNK i DNK iz oralnih tekućina.

Objašnjenje oznake:

-  Proučite upute za primjenu
-  Prikupljanje uzorka od strane (uporaba od strane)
-  Kataloški broj
-  Oprez, proučite upute za uporabu
-  15°C / 30°C Upute za čuvanje
-  Proizvođač
-  Broj šarže

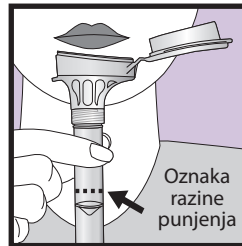
Prikupljeni uzorak je potencijalno zarazan i potrebno je primjenjivati odgovarajuće biosigurnosne postupke.

Slati u skladu s važećim propisima za prijevoz bioloških uzoraka.


Za upute o prikupljanju od strane davatelja na drugim jezicima vidi http://dnagenotek.com/DNA_Genotek_Support_Lit_UI_OM-501.html

UPUTE ZA UPORABU


Većini je ljudi potrebno 2 do 5 minuta za davanje uzorka ako slijede korake od 1 do 5.



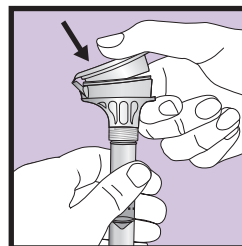
- 1** Pljunkte u lijevak dok količina tekućine (ne mjehurići) ne dosegne oznaku prikazanu na slici #1.



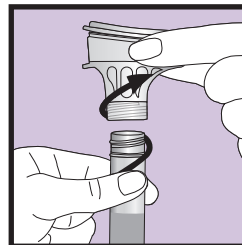
- 2** Držite epruvetu uspravno jednom rukom. Zatvorite poklopac lijevka drugom rukom (kao što je to prikazano) čvrsto ga gurajući dok ne čujete glasan klik. Tekućina se iz poklopca ispušta u epruvetu radi miješanja s uzorkom. Poklopac čvrsto zatvorite.



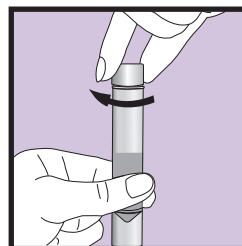- 3** Držite epruvetu uspravno. Odrvnite lijevak s epruvete.



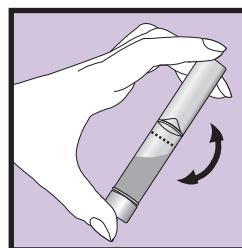- 4** Malim čepom čvrsto zatvorite epruvetu.



- 5** Protresajte začepljenu epruvetu 5 sekundi. Bacite ili reciklirajte lijevak.

Samo za istraživanje. Ne koristiti za dijagnostičke postupke.

Proizvod nije dostupan za kliničku dijagnostičku uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama.

DNAGENOTEK™

*Vrhunski uzorci
Dokazana učinkovitost*

Proizvedeno u Kanadi
DNA Genotek™ Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNigene je registrirani zaštitni znak kompanija DNA Genotek™ Inc.

Neki proizvodi kompanija DNA Genotek™ Inc. nisu dostupni u svim zemljopisnim regijama, za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku.

Svi proizvodi od DNA Genotek™, informativne publikacije i naputci o primjeni dostupni su u odjelu za tehničku podršku na našoj mrežnoj stranici www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2020 DNA Genotek™ Inc., podružnica kompanije OraSure Technologies Inc., sva prava zadržana.
PD-PR-00371 (HR - Croatian) Issue 3/2020-05