

### Mjere opreza pri prikupljanju:

**NE smijete jesti, piti, pušiti, žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije davanja svog uzorka.**

**NEMOJTE odstraniti plastičnu foliju s poklopca lijevka.**

**Sadržaj:** komplet sadrži tekućinu za stabilizaciju.

### Upozorenje i mjere opreza:

Isperite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati.

Vidi sigurnosno-tehnički list na [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).




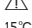



Mali čep predstavlja opasnost od gušenja.

**Čuvanje:** 15°C / 30°C

### Sažetak i pojašnjenje kompleta:

OMNigene®-ORAL je komplet za prikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje i stabilizaciju mikrobne RNK i DNK iz oralnih tekućina.

### Objašnjenje oznake:

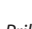-  Proučite upute za primjenu
-  Prikupljanje uzorka od strane (uporaba od strane)
-  Kataloški broj
-  Oprez, proučite upute za uporabu
-  15°C / 30°C Upute za čuvanje
-  Proizvođač
-  Broj šarže


*Prikupljeni uzorak je potencijalno zarazan i potrebno je primjenjivati odgovarajuće biosigurnosne postupke.*

*Slati u skladu s važećim propisima za prijevoz bioloških uzoraka.*


*Za upute o prikupljanju od strane davatelja na drugim jezicima vidi [http://dnagenotek.com/DNA\\_Genotek\\_Support\\_Lit\\_UL\\_OM-505.html](http://dnagenotek.com/DNA_Genotek_Support_Lit_UL_OM-505.html)*

## UPUTE ZA UPORABU


**Većini je ljudi potrebno 2 do 5 minuta za davanje uzorka ako slijede korake od 1 do 5.**

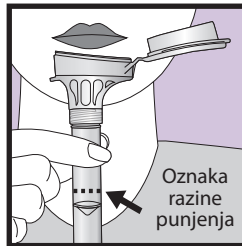


- 1** Pljunkte u lijevak dok količina tekućine (ne mjehurići) ne dosegne oznaku prikazanu na slici #1.

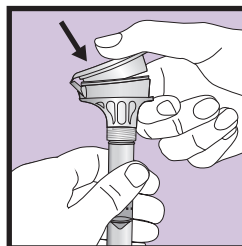


- 2** Držite epruvetu uspravno jednom rukom. Zatvorite poklopac lijevka drugom rukom (kao što je to prikazano) čvrsto ga gurajući dok ne čujete glasan klik. Tekućina se iz poklopca ispušta u epruvetu radi miješanja s uzorkom. Poklopac čvrsto zatvorite.

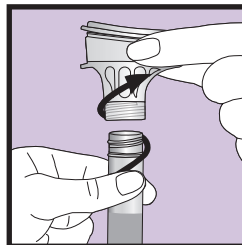

- 3** Držite epruvetu uspravno. Odrvnite lijevak s epruvete.

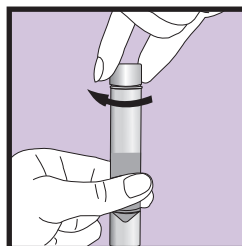

- 4** Malim čepom čvrsto zatvorite epruvetu.

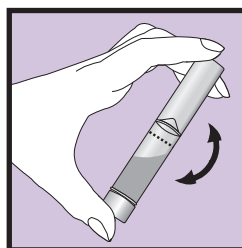

- 5** Protresajte začepljenu epruvetu 5 sekundi. Bacite ili reciklirajte lijevak.

**Samo za istraživanje. Ne koristiti za dijagnostičke postupke.**

Proizvod nije dostupan za kliničku dijagnostičku uporabu u Sjedinjenim Američkim Državama.

**DNAGENOTEK™**

*Vrhunski uzorci  
Dokazana učinkovitost*

Proizvedeno u Kanadi  
DNA Genotek™ Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNigene je registrirani zaštitni znak kompanija DNA Genotek™ Inc.

Neki proizvodi kompanija DNA Genotek™ Inc. nisu dostupni u svim zemljopisnim regijama, za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku.

Svi proizvodi od DNA Genotek™, informativne publikacije i naputci o primjeni dostupni su u odjelu za tehničku podršku na našoj mrežnoj stranici [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2020 DNA Genotek™ Inc., podružnica kompanije OraSure Technologies Inc., sva prava zadržana.  
PD-PR-00372 (HR - Croatian) Issue 3/2020-05