
**Forholdsregler ved innsamling:**

**Forsikre deg om at svampen IKKE kommer i kontakt med noen overflater før innsamling.**

**Donorer bør IKKE spise, drikke, røyke eller tygge tyggegummi 30 minutter før prøvetaking.**

**Tiltenkt bruk:** Dette produktet er beregnet for å samle inn og stabilisere DNA fra orale prøver fra mennesker.

**Innhold:** Inneholder 1 innsamlingssett.

**Advarsler og forholdsregler:** Kvelningsfare. Det bør utvises forsiktighet når man plasserer svampen inn i donorens munn.








Rengjør med vann hvis væsken kommer i kontakt med øyne eller hud. Må ikke inntas. Se MSDS på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

**Lagring:** 15-25°C

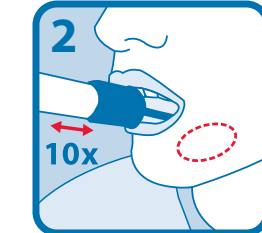
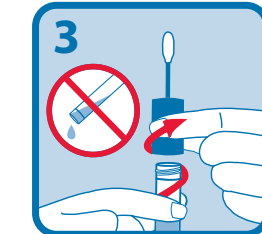
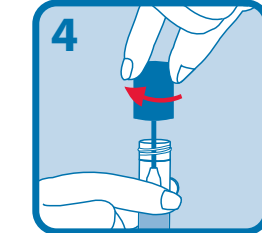
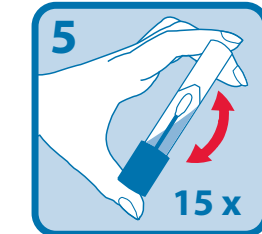
**Oppsummering og forklaring til settet:**

ORAc collect-DNA inn er et sett for trygg oppsamling som gir deg materiell og instruksjer til å samle opp spyttprøver fra mennesker.

**Etikettmerking:**

	Katalognummer
	In vitro diagnostisk medisinsk enhet
	CE-merking
	Produsent
	Autorisert representant
15°C-25°C	Instruksjoner for lagring
	Ta prøven før (bruk før)
	Partinummer

**Instruksjon for prøvetaking:**

	<p>Åpne pakken og fjern innsamleren uten å berøre svamptuppen. Plasser svampen så langt tilbake i munnen som det er komfortabelt og gni frem og tilbake langs den nedre gommen (se nærbilde). Gni forsiktig i 10 ganger. Om mulig, unngå å gni tennene.</p>
	<p>Gjenta gni-bevegelsen på motsatt side av munnen langs den nedre gommen nye 10 ganger.</p>
	<p>Hold røret loddrett for å unngå at det søles væske fra innsiden av røret. Skru det blå lokket av innsamlingsrøret uten å berøre svampen.</p>
	<p>Snu lokket opp-ned, sett svampen inn i røret og lukk lokket godt.</p>
	<p>Snu røret med lokket og ryst godt 15 ganger.</p>



For In Vitro Diagnostisk bruk

**DNAgenotek**



*Førsteklasses prøver  
Anerkjent ytelse*

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tlf: +1.613.723.5757  
Faks: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORAc collect\*-DNA selges ikke i USA.

\*ORAc collect er et registrert varemerke for DNA Genotek Inc.

Enkelte DNA Genotek-produkter er muligens ikke tilgjengelige i alle land. Kontakt din salgsrepresentant for ytterligere informasjon.

Alle DNA Genotek-produkter, tekniske dokumenter og søknadsnotater er tilgjengelige under support på nettsiden vår på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2019 DNA Genotek Inc., et datterselskap tilhørende OraSure Technologies, Inc., alle rettigheter forbeholdt.  
PD-PR-00389 (NB - Norwegian) Issue 2/2019-10