


Precauzioni per il prelievo:

Assicurarsi che la punta della spugna NON entri in contatto con una superficie prima del prelievo.

Il donatore NON deve mangiare, bere, fumare o masticare chewing-gum nei 30 minuti precedenti il prelievo del campione orale.

Uso previsto: Questo prodotto è destinato al prelievo e alla stabilizzazione del DNA da campioni orali umani.

Contenuto: Contiene 1 kit di prelievo.

Avvertenze e precauzioni: Rischio di soffocamento. Prestare attenzione mentre si inserisce una spugna nella bocca del donatore.

Se il liquido viene a contatto con occhi o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Vedere la scheda di sicurezza riportata su www.dnagenotek.com.

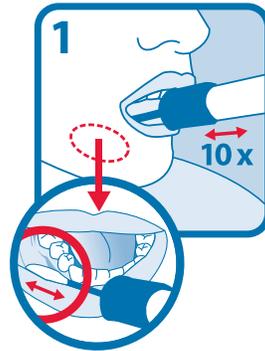
Conservazione: 15-25°C

Riassunto e spiegazione del kit:

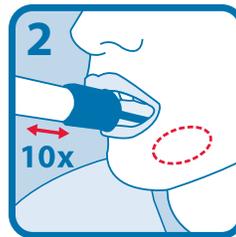
ORAcollect-DNA è un kit di autoprelievo che fornisce i materiali e le istruzioni per il prelievo dei campioni orali umani.

Legenda dell'etichetta:

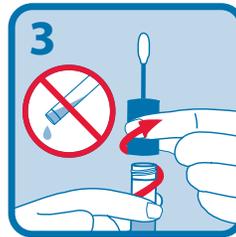
	Numero di catalogo
	Dispositivo medico diagnostico in vitro
	Marcatura CE
	Produttore
	Rappresentante autorizzato
	15°C-25°C Istruzioni per la conservazione
	Prelevare il campione entro il (Utilizzare entro il)
	Numero di lotto

Istruzioni per il prelievo di campioni:


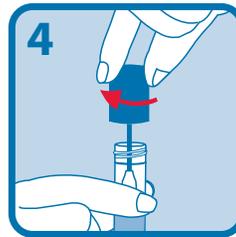
Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo di prelievo senza toccare la punta della spugna. Inserire la spugna nella posizione più interna della bocca senza causare disagio e strofinare lungo le gengive inferiori (vedere l'immagine ingrandita) con un movimento alternato avanti e indietro. Strofinare delicatamente le gengive per 10 volte. Se possibile, evitare di strofinare i denti.



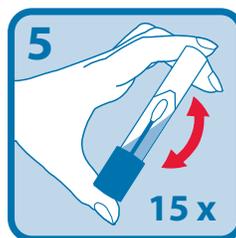
Ripetere delicatamente il movimento di sfregamento sul lato opposto della bocca, lungo le gengive inferiori, per ulteriori 10 volte.



Tenere la provetta verticalmente, in modo da evitare la fuoriuscita del liquido presente all'interno della provetta. Svitare il tappo blu dalla provetta di prelievo, senza toccare la spugna.



Posizionare il cappuccio a testa in giù, inserire la spugna nella provetta e chiudere il tappo ermeticamente.



Invertire la provetta con cappuccio e agitare energicamente per 15 volte.



Per uso diagnostico in vitro

DNAgenotek


*Campioni di alta qualità
 Performance dimostrata*

DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
 Fax: +1.613.723.5057
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORAcollect®-DNA non è in vendita negli Stati Uniti d'America.

*ORAcollect è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.

Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni.

Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet www.dnagenotek.com.

Brevetto (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2019 DNA Genotek Inc., una consociata di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.
 PD-PR-00393 (IT - Italian) Issue 2/2019-10