


**Меры предосторожности при сборе образцов:**

Проследите, чтобы перед сбором образца кончик с губкой НЕ соприкасался ни с какими поверхностями.

Донору нельзя принимать пищу, пить, курить или пользоваться жевательной резинкой в течение 30 минут до сбора образца во рту.

**Назначение:** данный продукт предназначен для сбора образцов ДНК у человека во рту и их стабилизации.

**Содержимое:** содержит 1 набор для сабора образцов.

**Предупреждения и меры предосторожности:** Опасность удушья. При вводе губки в рот следует действовать осторожно.

Если жидкость попадет в глаза или на кожу, промойте их водой. НЕ принимать внутрь. См. сертификат безопасности материала [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)


**Хранение:** 15-25°C

**Краткое описание и пояснение к набору:**


ORACollect-DNA – это набор для самостоятельного сбора образцов, в который входят материалы и инструкции для сбора образцов у человека во рту.

**Условные обозначения на ярлыке:**

	Номер в каталоге
	Медицинский прибор для диагностики in-vitro
	Маркировка CE
	Производитель
	Уполномоченный представитель
	15°C-25°C Инструкция по хранению
	Собрать образец до (Использовать до)
	Номер партии

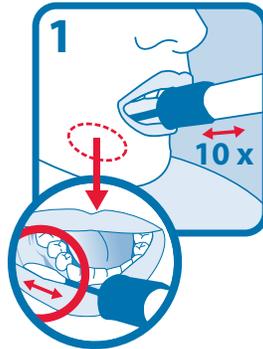


Вскройте упаковку и выньте шпатель, не прикасаясь к кончику с губкой. Вставьте губку как можно дальше в рот, не вызывая дискомфорта, и потрите нижнюю десну (см. увеличенное изображение), двигая ею вперед-назад. Осторожно потрите десну 10 раз. По возможности постарайтесь не тереть при этом зубы.

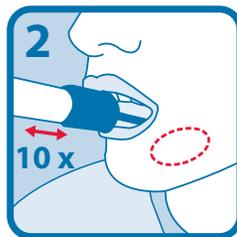


Осторожно еще 10 раз потрите нижнюю десну с другой стороны рта.



Держите пробирку вертикально, чтобы не расплескать жидкость внутри пробирки. Откройте синий колпачок с пробирки, в которую набирается образец, не прикасаясь к губке.

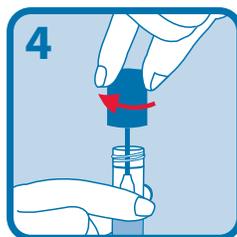

Переверните колпачок вниз, вставьте губку в пробирку и плотно закройте колпачок.

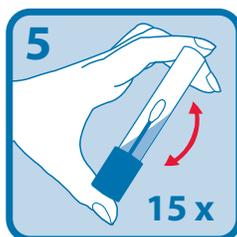

Переверните закрытую колпачком пробирку и сильно взболтайте 15 раз.



Для диагностики in-vitro

**DNA genotek**

*Образцы высокого качества  
Проверенная эффективность*

DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Тел.: +1.613.723.5757  
факс: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORACollect®-DNA недоступен для продажи в Соединенных Штатах Америки.

\*ORACollect является зарегистрированным торговым знаком компании DNA Genotek Inc.

Возможно, что некоторые продукты компании DNA Genotek не будут представлены во всех географических регионах.

Все протоколы компании, технические описания и указания по применению DNA Genotek можно найти в разделе поддержки на нашей страничке по адресу: [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Патент ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2019 DNA Genotek Inc., дочерняя компания OraSure Technologies, Inc., все права защищены.  
PD-PR-00398 (RU - Russian) Issue 2/2019-10