



ORagene®DNA

REF OG-500 и OG-510

REF OG-600 и OG-610



Меры предосторожности при сборе слюны:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ принимать пищу, пить, курить или пользоваться жевательной резинкой в течение 30 минут до сбора слюны.

НЕ снимать пластмассовую пленку с крышки воронки.

Изделие предназначено для получения образцов ДНК человека из слюны.

Содержимое: в наборе содержится стабилизирующая жидкость.

Предупреждения и меры предосторожности: при попадании стабилизирующей жидкости в глаза или на кожу промыть их водой. Не принимать внутрь. См. паспорт безопасности на веб-сайте www.dnagenotek.com.

Маленькая крышка при попадании в дыхательные пути может привести к удушью.

Хранить при: 15°C ÷ 30°C

Общие сведения о наборе и пояснения:

Набор Oragene-DNA для самостоятельного сбора содержит материалы для сбора и стабилизации образцов слюны, а также инструкции.

Условные обозначения на этикетке:


	См. инструкцию-вкладыш
	Использовать для сбора слюны до (годен до)
	Медицинское изделие для диагностики in-vitro
	Номер в каталоге
	Маркировка CE
	Внимание, обратитесь к инструкции по применению
	Инструкция по хранению
	Уполномоченный представитель
	Производитель
	Номер партии

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Прочтите всю инструкцию прежде, чем выполнить сбор слюны.

Процедура:


Большинству людей для сбора образца слюны (этапы 1-5) требуется от 2 до 5 минут.

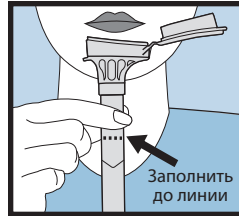


1 Сплевывайте в воронку до тех пор, пока количество жидкой (не пенистой) части слюны не достигнет уровня, показанного на рисунке 1.

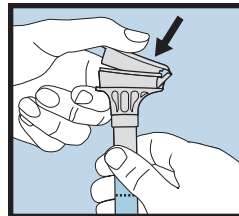


2 Удерживайте пробирку вертикально одной рукой. Закройте крышку воронки другой рукой (см. рисунок), с усилием нажимая на крышку до тех пор, пока не услышите громкий щелчок. Находящаяся в крышке жидкость перельется в пробирку и смешается со слюной. Убедитесь, что крышка закрыта плотно.

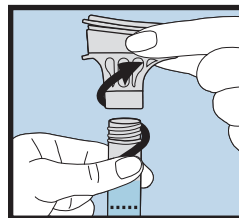

3 Удерживайте пробирку вертикально. Отвинтите воронку от пробирки.

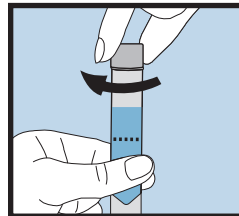

4 Плотно закройте пробирку маленькой крышкой.

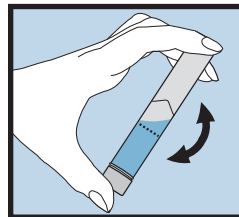

5 Встряхивайте закрытую пробирку в течение 5 секунд. Выбросите воронку в отходы или отправьте на утилизацию.



Для диагностики in-vitro

DNA genotek



Произведено в Канаде
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Образцы высокого качества
Проверенная эффективность

Tel.: +1.613.723.5757
Факс: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®-DNA недоступен для продажи в Соединенных Штатах Америки.

*Oragene является зарегистрированным торговым знаком компании DNA Genotek Inc. Возможно, что некоторые продукты компании DNA Genotek не будут представлены во всех географических регионах. Все протоколы компании, технические описания и указания по применению DNA Genotek можно найти в разделе поддержки на нашей страничке по адресу: www.dnagenotek.com.

Патент (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., a subsidiary of OraSure Technologies Inc., все права защищены.
PD-PR-00426 (RU - Russian) Issue 3/2017-02