




ORagene®DNA

REF OG-500 i OG-510

REF OG-600 i OG-610

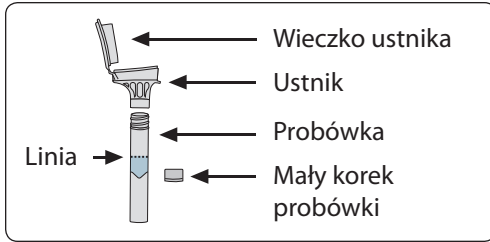

Środki ostrożności podczas pobierania próbek:

Przez 30 minut przed pobraniem próbki śliny NIE wolno jeść, pić, palić ani żuć gumy.

NIE zdejmować folii plastikowej z wieczka ustnika.

Przeznaczenie: Pobieranie ludzkiego DNA z próbek śliny.

Zawartość: Zestaw zawiera płyn stabilizujący.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: W razie kontaktu płynu stabilizującego z oczami lub skórą, należy przemyć je wodą. Nie połykać. Karta substancji jest dostępna w witrynie www.dnagenetek.com.

Mały korek stwarza ryzyko zadławienia

Przechowywanie: 15°C i 30°C

Opis zestawu:

Oragene-DNA to zestaw do samodzielnego pobierania próbek, który zawiera materiały i instrukcje do pobierania i stabilizacji próbek śliny.

Objaśnienie etykiety:


	Patrz informacja w opakowaniu
	Ostateczny termin pobrania śliny (termin przydatności do użycia)
	Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro
	Numer katalogowy
	Oznaczenie CE
	Uwaga – przeczytaj instrukcję obsługi
	Instrukcja przechowywania
	Autoryzowany przedstawiciel
	Producent
	Numer partii

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed pobraniem próbki należy przeczytać całą instrukcję

Procedura:


Dostarczenie próbki śliny zajmuje średnio od 2 do 5 minut i wymaga wykonania czynności podanych w punktach od 1 do 5.

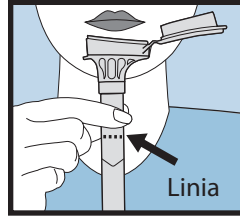


1 Pluj do ustnika, aż ilość płynnej śliny (nie piany) osiągnie poziom zaznaczony linią, pokazany na rysunku nr 1.

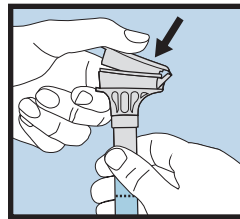


2 Trzymaj probówkę pionowo jedną ręką. Zamknij wieczko ustnika drugą ręką (zgodnie z rysunkiem), mocno je dociskając, aż usłyszysz głośny trzask. Płyn we wieczku wypłynie do probówki i zmiesza się ze śliną. Upewnij się, że wieczko jest szczelnie zamknięte.

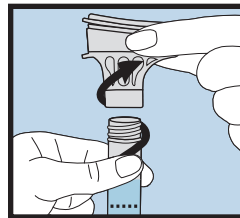

3 Trzymaj probówkę pionowo. Odkręć ustnik od probówki.

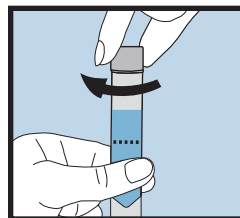

4 Zamknij szczelnie probówkę małym korkiem.

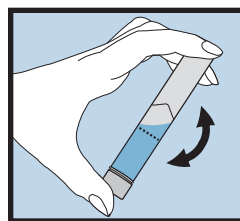

5 Potrząśnij zamkniętą probówką przez 5 sekund. Wyrzuć ustnik.



Do diagnostyki in vitro

DNAgenetek



Wyprodukowano w Kanadzie
DNA Genetek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

*Doskonałe próbki
Sprawdzona jakość*

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com
www.dnagenetek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene-DNA niedostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych.

*Oragene jest zarejestrowanym znakiem towarowym DNA Genetek Inc.

Niektóre produkty DNA Genetek mogą być niedostępne we wszystkich regionach geograficznych, skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Wszystkie protokoły DNA Genetek, białe książki i noty aplikacyjne, są dostępne w sekcji na naszej stronie internetowej www.dnagenetek.com.

Patent (www.dnagenetek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genetek Inc., spółka zależna OraSure Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PD-PR-00439 (PL - Polish) Issue 2/2017-02