




ORagene®DNA

REF OG-500 và OG-510

REF OG-600 và OG-610

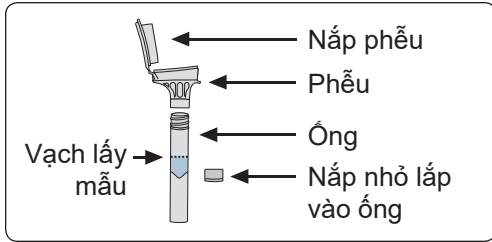

Phòng ngừa khi lấy mẫu:

KHÔNG ăn, uống, hút thuốc hoặc nhai kẹo cao su 30 phút trước khi lấy mẫu nước bọt.

KHÔNG tháo màng nhựa ra khỏi nắp phễu.

Mục đích sử dụng: Để thu thập DNA người từ mẫu nước bọt.

Nội dung: Bộ dụng cụ chứa dung dịch giữ ổn định.

Cảnh báo và phòng ngừa: Rửa bằng nước nếu dung dịch giữ ổn định tiếp xúc với mắt hoặc da. **KHÔNG** uống. Xem mô tả an toàn MSDS tại www.dnagenotek.com.











Nắp nhỏ, nguy cơ gây nghẹn họng.

Bảo quản: 15°C ÷ 30°C

Tóm tắt và giải thích về bộ dụng cụ:

Oragene-DNA là bộ công cụ tự lấy mẫu, bao gồm vật liệu và hướng dẫn để thu thập và giữ ổn định mẫu xét nghiệm nước bọt.

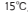Chú thích nhãn:

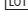
-  Tham khảo tài liệu đi kèm gói sản phẩm
-  Lấy mẫu nước bọt trước ngày (Sử dụng trước ngày)
-  Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm
-  Số danh mục
-  Dấu hiệu CE
-  Thận trọng, tham khảo hướng dẫn khi sử dụng
-  15°C ÷ 30°C Hướng dẫn bảo quản
-  Đại diện ủy quyền
-  Nhà sản xuất
-  Số lô sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Đọc toàn bộ hướng dẫn trước khi lấy mẫu

Thủ tục:


Hầu hết mọi người cần từ 2 đến 5 phút để lấy mẫu nước bọt khi thực hiện theo các bước từ 1 đến 5.

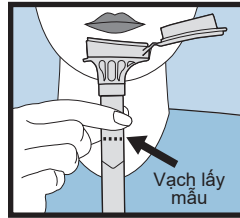


- 1** Nhổ nước bọt vào phễu cho đến khi lượng dung dịch nước bọt (chứ không phải bọt) lên đến vạch lấy mẫu trong hình #1.

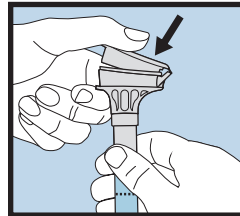


- 2** Giữ ống thẳng đứng bằng một tay. Đóng nắp phễu bằng tay kia (như trên hình) bằng cách ấn chặt nắp cho đến khi nghe thấy tiếng click to. Chất lỏng trong nắp sẽ thoát ra và đi vào ống để hòa trộn với nước bọt. Đảm bảo rằng nắp đóng chặt.

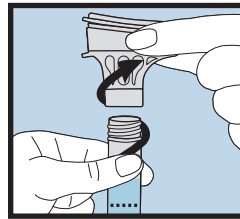

- 3** Giữ ống thẳng đứng. Vặn phễu ra khỏi ống.

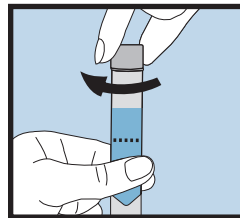

- 4** Sử dụng nắp nhỏ để đóng chặt ống.

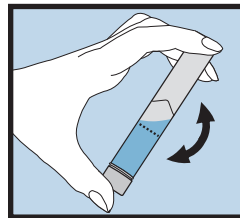

- 5** Lắc ống đã lắp nắp trong 5 giây. Vứt bỏ hoặc tái chế phễu.



Chỉ Dành Cho Chẩn Đoán Trong Ống Nghiệm

DNAgenotek



Sản xuất tại Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Mẫu xét nghiệm cao cấp
Hiệu suất đã được minh chứng*

ĐT: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

Oragene®DNA không bán tại Hoa Kỳ.

*Oragene là thương hiệu đã được đăng ký của DNA Genotek Inc.

Một số sản phẩm của DNA Genotek có thể không có tại tất cả các khu vực địa lý, vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng của bạn để biết chi tiết.

Tất cả các phác đồ điều trị, sách trắng và ghi chú ứng dụng của DNA Genotek đều có trong mục hỗ trợ của trang web của chúng tôi tại www.dnagenotek.com.

Bằng phát minh sáng chế (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., một công ty con của OraSure Technologies, Inc., bảo lưu toàn quyền.

PD-PR-00522 (VI - Vietnamese) Issue 3/2017-02