



para pediatria

REF OC-175



Precauções de coleta:

Certifique-se de que a ponta da esponja NÃO entre em contato com qualquer superfície antes da coleta.

O doador NÃO deve ingerir, beber, fumar ou mascar chiclete no período de 30 minutos antes da coleta da amostra oral.

Destinado à coleta de DNA humano de amostras orais pediátricas.

Conteúdo: Contém 1 kit de coleta.

Aviso e precauções: A ponta da esponja representa risco de engasgamento. É necessário ter cuidado quando inserir a esponja na boca. Em coletas assistidas, NÃO deixe o bebê ou criança sozinho.

Lave com água se o líquido entrar em contato com os olhos ou pele. NÃO ingerir. Consulte a MSDS em www.dnagenotek.com

Armazenamento: 15 a 25°C


Resumo e explicação do kit:

ORACollect para pediatria é um kit de coleta assistida que oferece os materiais e instruções para a coleta e estabilização do DNA humano de amostras orais pediátricas.


Legenda das etiquetas:

	Fabricante
	Número do catálogo
	Não esterilizado
	Número de lote
	Coletar a amostra até (data de validade)
	15°C a 25°C Instruções de armazenamento

Instruções para a coleta de amostras:

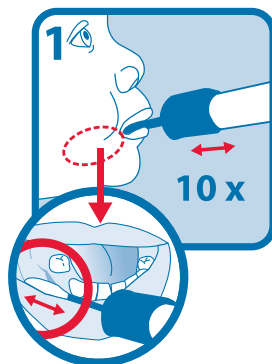


Abra a embalagem e remova o coletor sem tocar a ponta da esponja. Coloque a esponja o mais fundo e confortável possível na boca e esfregue a gengiva inferior (ver imagem ampliada) em movimentos para trás e para frente. Esfregue as gengivas delicadamente 10 vezes. Se for possível, evita esfregar os dentes.

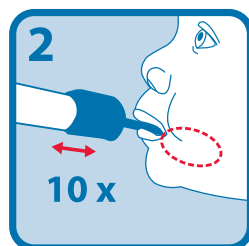


Repita o movimento de esfregação delicadamente no lado oposto da boca pela gengiva interior por mais 10 vezes.



Segure o tubo em posição vertical para evitar que o líquido dentro do tubo derrame. Solte a tampa azul do tubo de coleta sem tocar a esponja.

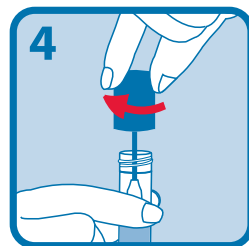

Vire a tampa para baixo, insira a esponja no tubo e feche-o hermeticamente.

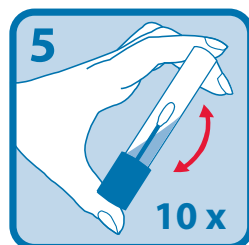

Inverta o tubo fechado com a tampa e agite vigorosamente 10 vezes.

Para uso exclusivo em pesquisas

Não usar em procedimentos diagnósticos



Amostras superiores
Desempenho comprovado

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*ORACollect é marca registrada da DNA Genotek Inc.

Alguns produtos da DNA Genotek podem não estar à venda em todas as regiões geográficas, entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

Todos os protocolos, livros brancos e descrições de uso da DNA Genotek estão disponíveis na seção de suporte de nosso site www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2019 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., Todos os direitos reservados.
PD-PR-00672 (BZ - Portuguese) Issue 2/2019-10