

WC doplněk OM-AC1

Pro použití s  **OMNIGENE®-GUT**


NÁVOD K POUŽITÍ

Tento WC doplněk se používá se sadou OMNIGENE®-GUT za účelem odběru vzorků stolice.


Upozornění: NEDOVOLTE, aby tento WC doplněk přišel do styku s vodou z WC, močí, čisticími prostředky nebo vonnými látkami.

Skladování: 15 °C až 25 °C


Postup:

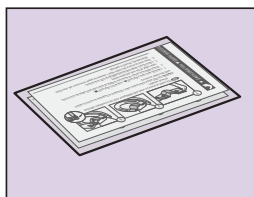


1 Balení obsahuje dva WC doplňky pro případ, že se odběr napoprvé nezdaří.

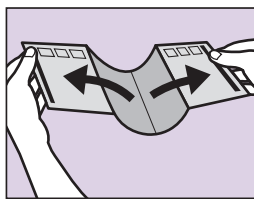

2 Opatrně rozbalte okraj s ▲; opakujte postup u okraje s ■.

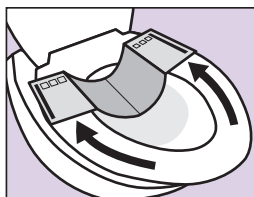

3 WC doplněk nalepte lepivým povrchem na **ZADNÍ část WC sedátka** tak, aby lepidlo bylo blízko vnějšího okraje sedátka. Poté pevně přitlačte.

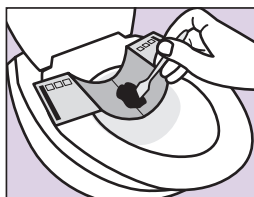

4 Odeberte vzorek stolice podle návodu k použití sady OMNIGENE-GUT.



5 Použitý doplněk vhodte do WC. Počkejte 1 minutu, dokud papír nezměkne. Poté spláchněte. Použitý doplněk můžete také odhodit do odpadu.

DNA genotek



OM-AC1 se vyrábí v Nizozemsku pro společnost DNA Genotek Inc. 3000 - 500 Palladium Drive Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

*Kvalitnější vzorky
Prokázaná výkonnost*

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGENE je registrovanou ochrannou známkou společnosti DNA Genotek Inc. Některé výrobky společnosti DNA Genotek nemusí být dostupné ve všech zeměpisných regionech. Pro další informace kontaktujte svého obchodního zástupce. Veškeré protokoly, bílé knihy a aplikační poznámky společnosti DNA Genotek jsou k dispozici v sekci podpory na našich internetových stránkách www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., dceřiná společnost OraSure Technologies, Inc., všechna práva vyhrazena.
PD-PR-00726 (CS - Czech) Issue 2/2018-11

