
**Precauciones para la colección:**

**NO coma, beba, fume ni mastique chicle en los 30 minutos previos a la toma de la muestra.**

**NO quite la película plástica de la tapa del embudo.**

**Contenido:** El kit contiene líquido estabilizador.

**Advertencias y precauciones:**

Enjuague con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. NO lo ingiera. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

La tapa pequeña puede presentar un riesgo de asfixia.

**Almacenamiento:** 15°C / 30°C

**Resumen y explicación del kit:**

OMNigene-ORAL es un kit de colección de muestras que proporciona los materiales y las instrucciones para coleccionar y estabilizar ARN y ADN microbiano de líquidos orales.

**Legenda de la etiqueta:**


	Consulte el prospecto del paquete
	Colecte la muestra antes del (fecha de caducidad)
	Número de catálogo
	Precaución: consulte las instrucciones de uso
15°C / 30°C	Instrucciones de almacenamiento
	Fabricante
	Número de lote

*La muestra colectada puede ser potencialmente infecciosa y debe manipularse siguiendo las prácticas adecuadas de bioseguridad.*

*Envíe la muestra de acuerdo con la normativa aplicable al transporte de muestras biológicas.*

**INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO**


La mayoría de las personas tarda entre 2 y 5 minutos en proporcionar una muestra siguiendo los pasos 1 a 5.

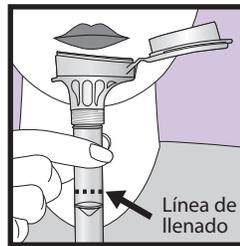


**1** Escupa en el embudo hasta que la cantidad de líquido (sin burbujas) alcance la línea de llenado que se muestra en la imagen 1.




**2** Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra), empujándola con firmeza hasta que escuche un chasquido fuerte. El líquido de la tapa se verterá en el tubo y se mezclará con la muestra. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.

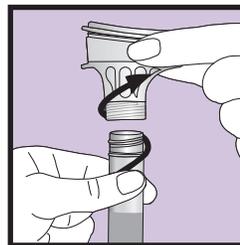

**3** Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

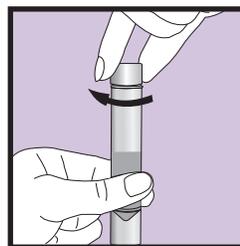

**4** Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo herméticamente.

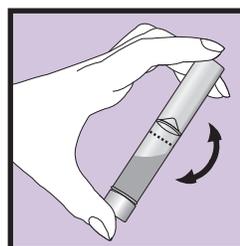

**5** Agite el tubo tapado durante 5 segundos. Deseche o recicle el embudo.

**Solo para usos de investigación, no para uso diagnóstico.**  
No disponible para uso en diagnóstico clínico en los Estados Unidos.

**DNAGENOTEK™**

*Muestras superiores  
Eficacia comprobada*

Fabricado en Canadá  
DNA Genotek™ Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Norteamérica (número gratuito): 1.866.813.6354  
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

OMNigene-ORAL solo debe utilizarse con fines de investigación, no con fines diagnósticos.

\*OMNigene es una marca comercial registrada de DNA Genotek™ Inc.

Es posible que algunos productos DNA Genotek™ no estén disponibles en todas las regiones geográficas; comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Todos los protocolos de DNA Genotek™, libros blancos y notas de aplicación están disponibles en la sección de soporte de nuestro sitio web en [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patente ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2020 DNA Genotek™ Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc., todos los derechos reservados.  
PD-PR-00779 (ES - Spanish) Issue 2/2020-05