

# OM-AC1 Toilet accessory

Ginagamit kasama ng  **OMNIGene®-GUT**


## MGA TAGUBILIN PARA SA TAGAGAMIT

Ang toilet accessory na ito ay ginagamit kasama ng OMNIGene®-GUT kit upang mapadali ang pagkolekta ng mga sampol ng dumi.


**Babala:** HUWAG hayaang madapuan ng tubig mula sa toilet, ihi, sabong panlinis, o pabango ang toilet accessory na ito.

**Pagtago:** 15°C hanggang 25°C


### Pamamaraan:

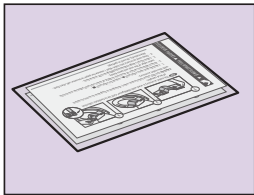


- 1 Dalawang toilet accessory ang nakalaan para kung sakaling hindi ka makakolekta ng sampol sa unang pagsubok.

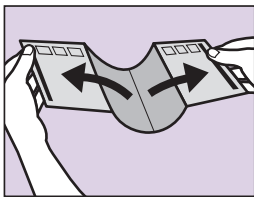


- 2 Maingat na buksan ang gilid na may ▲; ulitin para sa gilid na may ■.

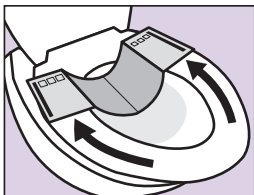

- 3 Idikit ang madikit na bahagi ng accessory sa **LIKOD ng upuan ng toilet** sa paraan na malapit ang madikit na parte sa panlabas na gilid ng upuan at idikit ito nang madiin.

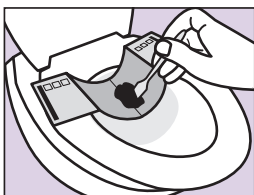

- 4 Kolektahin ang sampol ng dumi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin para sa tagagamit ng OMNIGene®-GUT.

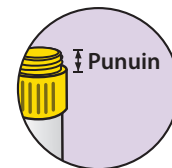

- 5 Ihulog ang ginamit na accessory sa toilet. Maghintay ng 1 minuto upang lumambot ang papel, at pagkatapos ay i-flush ito. Maaari rin itong itapon sa basurahan.

1 minuto

**DNA genotek**



Ginawa ang OM-AC1 sa Netherlands para sa DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Mahusay na mga sampol  
Napatunayan na paggawa*

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

Ang ®OMNIGene ay isang rehistradong trademark ng DNA Genotek Inc.

Ang ibang produkto ng Genotek ay maaaring hindi available sa lahat ng mga heograpikong rehiyon, makipag-ugnayan sa ahente para sa mga detalye.

Ang lahat ng mga protokol ng DNA Genotek, mga white paper at mga tala sa aplikasyon, ay matatagpuan sa seksiyon sa suporta ng aming website sa [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2018 DNA Genotek Inc., isang subsidiyaryo ng OraSure Technologies, Inc., ang lahat ng karapatan ay nakalaan.  
PD-PR-00849 (FL - Filipino) Issue 1/2018-11

