

# อุปกรณ์เสริมสำหรับห้องน้ำ OM-AC1

ใช้งานร่วมกับ  OMNIGENE-GUT


## คำแนะนำสำหรับผู้ใช้

อุปกรณ์เสริมสำหรับห้องน้ำนี้ใช้งานร่วมกับชุดเครื่องมือ OMNIGENE-GUT เพื่อให้สามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระได้ง่ายขึ้น


**ข้อควรระวัง:** อย่าให้น้ำในห้องน้ำ ปัสสาวะ ผงซักฟอก หรือน้ำหอมสัมผัสกับอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องน้ำนี้

การเก็บรักษา: 15°C ถึง 25°C


ขั้นตอน:

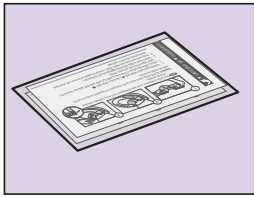


1 มีอุปกรณ์เสริมสำหรับห้องน้ำสองชั้น เพื่อกรณีที่คุณไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ในครั้งแรก

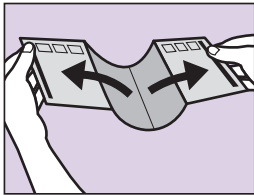

2 ลอกขอบ ▲ ออกอย่างระมัดระวัง และทำซ้ำกับขอบ ■

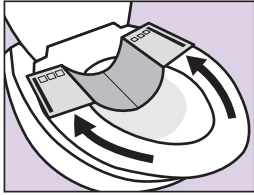

3 ตัดด้านกาวของอุปกรณ์เสริมที่ด้านหลังของฝารองนั่ง โดยให้กาวอยู่ใกล้กับขอบด้านนอกของที่นั่งและกดให้แน่น

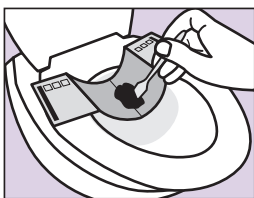

4 เก็บตัวอย่างอุจจาระ โดยทำตามคู่มือแนะนำการใช้งาน OMNIGENE-GUT



5 ทั้งอุปกรณ์เสริมที่ใช้แล้วในโถส้วม รอ 1 นาที เพื่อให้กระดาษอ่อนตัวจากนั้นจึงกดชักโครก นอกจากนี้ ยังสามารถทิ้งลงถังขยะได้



**DNA genotek**



OM-AC1 ผลิตภัณฑ์เนเธอร์แลนด์  
สำหรับ DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

ตัวอย่างที่เหนือกว่า  
ประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว  
โทร: +1.613.723.5757  
โทรสาร: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGENE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DNA Genotek Inc.  
ผลิตภัณฑ์ DNA Genotek บางรายการอาจไม่ได้มีวางจำหน่ายในทุกภูมิภาค โปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณเพื่อขอรายละเอียด  
ระเบียบวิธี สมุดปกขาว และหมายเหตุการใช้งานทั้งหมดของ DNA Genotek จะมีให้บริการในหัวข้อการสนับสนุนทางเว็บไซต์ของเราที่  
www.dnagenotek.com  
สิทธิบัตร (www.dnagenotek.com/legalnotices)  
© 2018 DNA Genotek Inc., เป็นบริษัทย่อยของบริษัท OraSure Technologies, Inc., ของวงวนสิทธิ์ทุกประการ  
PD-PR-00851 (TH - Thai) Issue 1/2018-11

