

# OM-AC1 Toiletaccessoire

Te gebruiken met  **OMNigene®GUT**


## GEBRUIKSAANWIJZING

Dit toiletaccessoire is bedoeld voor gebruik met de OMNigene®-GUT kit om het verzamelen van stoelgangstalen te vergemakkelijken.


**Opgelet:** zorg ervoor dat GEEN toiletwater, urine, detergent of geurelement in contact komt met dit toiletaccessoire.

**Opslag:** 15°C tot 25°C


### Procedure:

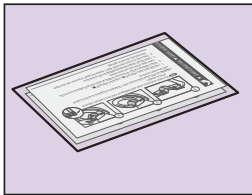


- 1** Er worden twee toiletaccessoires meegeleverd voor het geval u geen staal kunt verzamelen bij uw eerste poging.

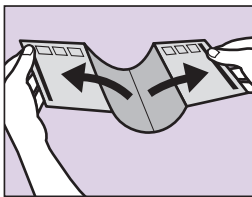


- 2** Trek voorzichtig de rand los met ▲; herhaal dit voor de rand met ■.

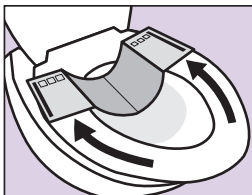

- 3** Bevestig het klevende oppervlak van het accessoire **ACHTERAAN** de **toiletbril** met de klevende strook aan de buitenste rand van de toiletbril en druk stevig vast.

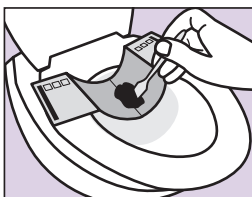

- 4** Verzamel het stoelgangstaal volgens de gebruiksaanwijzing voor OMNigene-GUT.

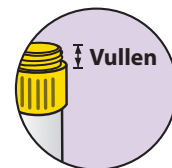

- 5** Laat het gebruikte accessoire in het toilet vallen. Wacht 1 minuut tot het papier zacht wordt en trek dan door. U kunt het ook weggooien met het restafval.

1 minuut

**DNA genotek**



OM-AC1 is gemaakt in Nederland voor DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Superieure stalen  
Bewezen prestaties*

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNigene is een geregistreerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.

Sommige DNA Genotek producten zijn misschien niet beschikbaar in alle geografische streken; neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer details.

Alle DNA Genotek protocollen, witboeken en gebruiksaanwijzingen kunnen worden geraadpleegd in het supportdeel van onze website op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2019 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.  
PD-PR-00870 (NL - Flemish) Issue 1/2019-02

