


**Precauções de coleta:**

**Cuidado para que a ponta da esponja NÃO entre em contato com qualquer superfície antes da coleta.**

**O doador não deve comer, beber, fumar ou mascar chicletes durante 30 minutos antes de coletar a amostra de saliva.**

**Uso previsto:** para a coleta e estabilização do RNA de amostras de saliva humana.

**Conteúdo:** contém 1 kit de coleta.

**Cuidados e precauções:**

Risco de asfixia. Deve-se ter cuidado ao inserir a esponja na boca.






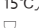

Lave com água caso o líquido entre em contato com olhos ou pele. NÃO ingerir. Veja o MSDS em [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)


**Armazenamento:** 15-25°C

**Resumo e explicação do kit:**


O ORACollect®-RNA é um kit que fornece os materiais e instruções para coletar amostras de saliva humana.

**Legenda do rótulo:**


	Número de catálogo
	Marca CE
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Fabricante
	Representante Autorizado
15°C-25°C	Instruções de armazenamento
	Coletar amostra por (Uso por)
	Número do lote

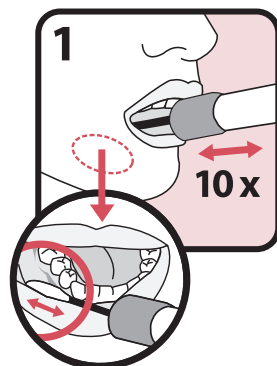


Abra a embalagem e retire o coletor sem tocar na ponta da esponja. Coloque a esponja o mais fundo possível na boca de forma confortável e esfregue ao longo da gengiva inferior (ver imagem), fazendo um movimento para a frente e para trás. Esfregue suavemente as gengivas 10 vezes. Se possível, evite esfregar os dentes.

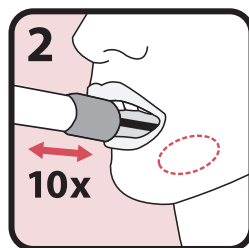


Repita delicadamente o movimento de atrito no lado oposto da boca, ao longo da gengiva inferior, por 10 vezes.

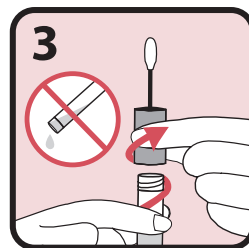

Segure o tubo na posição vertical para evitar o derramamento do líquido dentro do tubo. Desenrosque a tampa do tubo de coleta sem tocar na esponja.

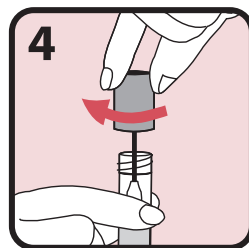

Posicione a tampa de cabeça para baixo, insira a esponja e feche a tampa firmemente.

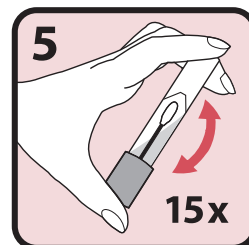

Inverta o tubo tapado e agite rapidamente por 15 vezes.



Para uso em diagnóstico In Vitro

**DNA genotek**


DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

*Amostras superiores*  
*Desempenho comprovado*

Tel.: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ANVISA Registro MS: 80117580856  
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, salas 502/503,  
Água Branca, São Paulo, SP - CEP: 05001-2000/CNPJ: 04.967.408/0001-98.  
Responsável Técnico: Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP: 42415

\*ORACollect é uma marca registrada da DNA Genotek Inc.  
Alguns produtos da DNA Genotek podem não estar disponíveis em todas as regiões, entre em contato com seu representante de vendas para mais informações.  
Todos os protocolos, white papers e notas de aplicação da DNA Genotek estão disponíveis na seção de suporte do nosso site, em [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patente ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2020 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., todos os direitos reservados.  
PD-PR-00886 (BZ - Brazilian Portuguese) Issue 2/2020-01