




ORagene®DNA

REF OG-500 dan OG-510

REF OG-600 dan OG-610

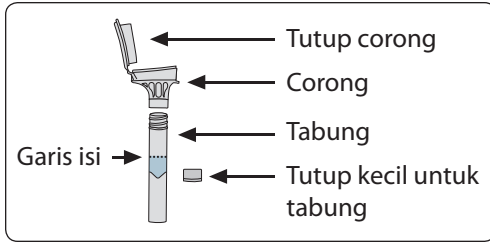

Tindakan pencegahan saat pengambilan sampel:

JANGAN makan, minum, merokok, atau mengunyah permen karet 30 menit sebelum mengambil sampel air liur.

JANGAN lepas lapisan plastik dari tutup corong.

Penggunaan: Untuk mengambil DNA manusia dari sampel air liur.

Isi: Kit berisi cairan penstabil.

Peringatan dan tindakan pencegahan: Jika mata atau kulit terkena cairan penstabil, segera basuh dengan air. **JANGAN** ditelan. Lihat MSDS di www.dnagenotek.com.

Tutup kecil berisiko tertelan.

Penyimpanan: 15°C / 30°C

Ringkasan dan penjelasan kit:

Oragene-DNA adalah kit pengambilan sampel mandiri yang berisi alat dan instruksi untuk mengambil dan menstabilkan spesimen air liur.

Legenda label:


	Lihat brosur yang disertakan dalam kemasan
	Pengambilan sampel air liur oleh (Penggunaan oleh)
	Peralatan medis diagnostik in vitro
	Nomor katalog
	Tanda CE
	Perhatian, lihat petunjuk penggunaan
	Petunjuk penyimpanan
	Perwakilan Resmi
	Produsen
	Nomor lot

PETUNJUK PENGGUNAAN


Baca petunjuk sebelum mengambil sampel

Prosedur:


Umumnya diperlukan waktu 2 sampai 5 menit untuk mengambil sampel air liur dengan mengikuti langkah 1 sampai 5.

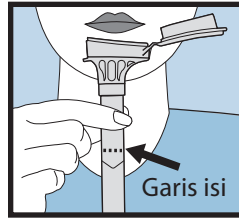


1 Meludahlah ke dalam corong sampai jumlah air liur (bukan gelembung) mencapai garis isi sebagaimana ditunjukkan gambar #1.

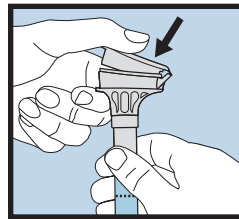


2 Pegang tabung tegak lurus dengan satu tangan. Tutup corong dengan tangan yang lain (sebagaimana ditunjukkan) dengan cara menekan kuat tutup hingga terdengar bunyi klik keras. Cairan di dalam tutup akan terlepas masuk ke dalam tabung sehingga bercampur dengan air liur. Pastikan tutup terpasang rapat.

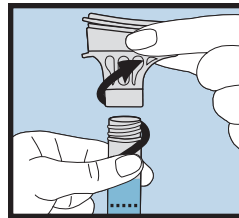

3 Pegang tabung tegak lurus. Putar untuk melepaskan corong dari tabung.

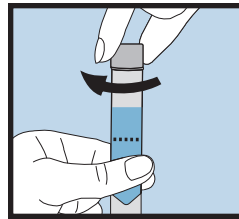

4 Gunakan tutup kecil untuk menutup rapat tabung.

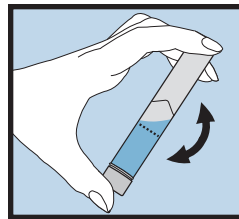

5 Kocok tabung yang sudah tertutup selama 5 detik. Buang atau daur ulang corong.



Untuk Penggunaan Diagnostik In Vitro

DNAgenotek



Dibuat di Kanada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

*Sampel unggulan
Performa terbukti*

Telp.: +1.613.723.5757
Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Belanda

Oragene®-DNA tidak untuk dijual di Amerika Serikat.
*Oragene adalah merek dagang terdaftar dari DNA Genotek Inc.
Beberapa produk DNA Genotek mungkin tidak tersedia di semua wilayah, hubungi perwakilan penjualan Anda untuk keterangan lebih lanjut.
Semua protokol DNA Genotek, laporan resmi, dan catatan pengaplikasian tersedia di bagian dukungan situs web kami di www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek Inc., anak perusahaan OraSure Technologies, Inc., hak cipta dilindungi undang-undang.
PD-PR-00934 (ID - Bahasa) Issue 1/2019-10