


**Mjere opreza pri prikupljanju:**

**Pazite da vrh spužve NE dotakne bilo koju površinu prije prikupljanja.**

**Davatelj NE SMIJE jesti, piti, pušiti ili žvakati žvakaću gumu 30 minuta prije davanja uzorka pljuvačke.**

**Namjena:** za prikupljanje i stabilizaciju RNA iz uzoraka ljudske pljuvačke.

**Sadržaj:** sadrži 1 komplet za prikupljanje.

**Upozorenje i mjere opreza:** opasnost od gušenja. Potreban je oprez pri umetanju spužve u usta.






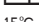


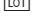
Operite vodom ako tekućina za stabilizaciju dođe u doticaj s očima ili kožom. NEMOJTE progutati. Pogledajte MSDS na [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

**Čuvanje:** 15-25 °C

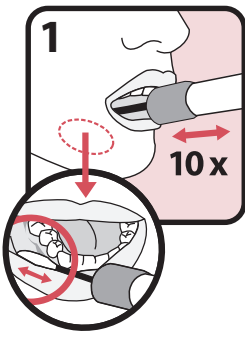
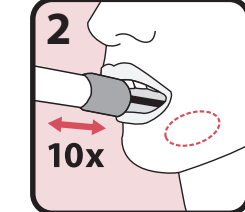

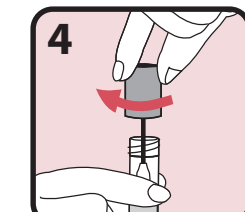
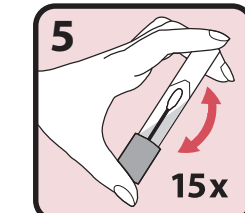
**Sažetak i objašnjenje kompleta:**

ORACollect<sup>®</sup>RNA je komplet za samoprikupljanje koji sadrži materijale i upute za prikupljanje uzoraka ljudske pljuvačke.

**Legenda etiketa:**

	Kataloški broj
	CE oznaka
	Dijagnostički medicinski uređaj In vitro
	Proizvođač
	Ovlašteni predstavnik
	15°C-25°C Upute za čuvanje
	Prikupiti uzorak do (upotrijebiti do)
	Broj serije
	Za uporabu samo na recept

**Upute za prikupljanje uzoraka:**

	<p>Otvorite paket i izvadite sakupljač ne dodirujući vrh spužve. Spužvu smjestite što je moguće više unatrag u usta i trljajte po donjim desnim (pogledajte sliku izbliza) naprijed-natrag. Nježno istrljajte desni 10 puta. Po mogućnosti izbjegavajte trljanje zuba.</p>
	<p>Nježno ponovite pokrete trljanja na suprotnoj strani usta duž donjih desni dodatnih 10 puta.</p>
	<p>Držite epruvetu uspravno kako biste spriječili prolijevanje tekućine iz epruvete. Odrvnite poklopac s epruvete za prikupljanje ne dodirujući spužvu.</p>
	<p>Okrenite poklopac naopako, umetnite spužvu u epruvetu i čvrsto zatvorite poklopac.</p>
	<p>Preokrenite zatvorenu epruvetu i snažno protresite 15 puta.</p>



Za IVD, Rx i za uporabu prema odobrenju za hitnu uporabu.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka nije odobren od strane FDA.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je od strane FDA prema EUA.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je samo za prikupljanje i održavanje uzoraka pljuvačke kao pomoć u otkrivanju nukleinske kiseline iz SARS-CoV-2 i ni za koje druge viruse ili patogene.

Ovaj uređaj za prikupljanje uzoraka odobren je samo za vrijeme trajanja izjave da postoje okolnosti koje opravdavaju odobrenje za hitnu uporabu in vitro dijagnostike za otkrivanje i/ili dijagnozu COVID-19 prema odjeljku 564(b)(1) Federalnog zakona o hrani, lijekovima i kozmetici, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), osim ako odobrenje ne bude ukinuto ili opozvano prije.

**DNAGENOTEK<sup>™</sup>**

■ DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

**Vrhunski uzorci • Dokazana učinkovitost**

Tel: +1.613.723.5757  
Faks: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

 Emurgo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

\*ORACollect je registrirani zaštitni znak, a DNA Genotek je zaštitni znak tvrtke DNA Genotek Inc. Neki proizvodi tvrtke DNA Genotek možda neće biti dostupni u svim zemljopisnim regijama, za detalje se obratite svom prodajnom predstavniku. Svi DNA Genotek protokoli, tehnički priručnici i napomene o prijavi dostupni su u odjeljku za podršku na našoj internetskoj stranici [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2020 DNA Genotek Inc., podružnica OraSure Technologies, Inc. sva prava pridržana.  
PD-PR-01071 (HR - Croatian) Issue 1/2020-12