

OM-AC1 Toilet-tilbehør

Anvendes med  **OMNIGENE®-GUT**


BRUGSANVISNING

Dette toilet-tilbehør anvendes med OMNIGENE®-GUT sættet med henblik på indsamling af fækale prøver.


Vigtigt: Sørg for, at toiletvand, urin, rengøringsmidler eller duftstoffer IKKE kommer i kontakt med dette toilet-tilbehør.

Opbevaring: 15°C til 25°C


Fremgangsmåde:

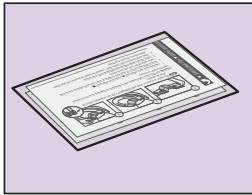


- 1** Indeholder to stk. toilet-tilbehør i tilfælde af, at det ikke lykkes for dig at indsamle en prøve i første forsøg.

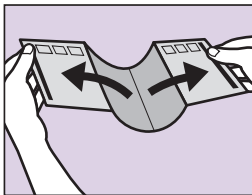

- 2** Åben forsigtigt hjørnet med ▲; gentag med hjørnet med ■.

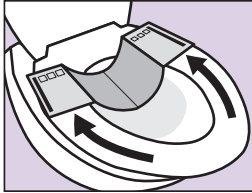

- 3** Fastgør den klæbende overflade af tilbehøret til **BAGSIDEN** af toiletsædet med klæbemidlet tæt på sædets ydre hjørne, og tryk godt til.

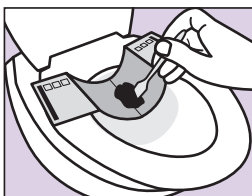

- 4** Indsaml den fækale prøve ved at følge OMNIGENE-GUT brugsanvisningen.



- 5** Smid det brugte tilbehør ned i toilettet. Vent 1 minut indtil papiret er blevet blødt, og skyl ud. Alternativt kan det også smides ud med det normale affald.

1 minut

DNA genotek



OM-AC1 er fremstillet i Holland for DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Kvalitetsprøver
Testet effektivitet

Tlf: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGENE er et registreret varemærke fra DNA Genotek Inc.
Ikke alle produkter fra DNA Genotek forhandles nødvendigvis i alle geografiske regioner, henvend dig venligst hos din salgsrepræsentant for yderligere information.
Alle DNA Genotek protokoller, hvidbøger og anvendelsesnotiser fås via support sektionen på vores hjemmeside under www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek, Inc. hører ind under OraSure Technologies, Inc., alle rettigheder forbeholdt.
PD-PR-00728 (DA - Danish) Issue 2/2018-11

CE