

Εξάρτημα τουαλέτας OM-AC1

Χρησιμοποιείται με το προϊόν  **OMNIgene®-GUT**


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το εξάρτημα τουαλέτας χρησιμοποιείται με το προϊόν OMNIgene®-GUT για ευκολότερη συλλογή δειγμάτων κοπράνων.


Προσοχή: ΜΗΝ φέρνετε νερό τουαλέτας, ούρα, απορρυπαντικά ή αρωματικά σε επαφή με αυτό το αξεσουάρ τουαλέτας.

Φύλαξη σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C


Διαδικασία:

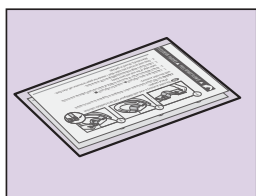


- 1** Παρέχονται δύο εξαρτήματα τουαλέτας για την περίπτωση που δεν είστε σε θέση να συλλέξετε ένα δείγμα με την πρώτη προσπάθεια.

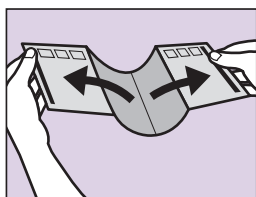

- 2** Τραβήξτε με προσοχή το χαρτί που καλύπτει την κολλώδη επιφάνεια από το άκρο με την ένδειξη ▲. Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άκρο με την ένδειξη ■.

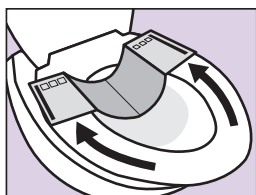

- 3** Επικολλήστε την επιφάνεια με την κολλώδη ουσία του εξαρτήματος στο **ΠΙΣΩ μέρος του καθίσματος της τουαλέτας** με την κολλώδη ουσία κοντά στο εξωτερικό άκρο του καθίσματος και πιέστε καλά.

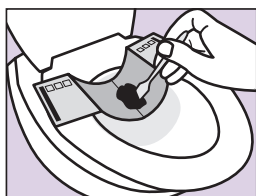

- 4** Συλλέξτε το δείγμα κοπράνων σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του OMNIgene-GUT.



- 5** Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο αξεσουάρ στην τουαλέτα. Περιμένετε 1 λεπτό να μαλακώσει το χαρτί και στη συνέχεια τραβήξτε το καζανάκι. Εναλλακτικά, απορρίψτε στα σκουπίδια.

1 λεπτό

DNA genotek



Το OM-AC1 κατασκευάζεται στις Κάτω Χώρες για λογαριασμό της DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Καναδάς. K2V 1C2

*Ανώτερης ποιότητας δείγματα
Αποδεδειγμένη απόδοση*

Τηλ: +1.613.723.5757
Φαξ: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Το *OMNIgene είναι σήμα κατατεθέν της DNA Genotek Inc.
Ορισμένα προϊόντα DNA Genotek ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.
Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων.
Όλα τα πρωτόκολλα, οι λευκές βιβλιοί και οι σημειώσεις εφαρμογής της DNA Genotek διατίθενται στην ενότητα υποστήριξης του ιστοτόπου μας στην ηλ. διεύθυνση www.dnagenotek.com.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., θυγατρική της OraSure Technologies Inc., με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
PD-PR-00844 (EL - Greek) Issue 1/2018-11

