


OM-AC2 sketilbehør

Bruges sammen med  **OMNIGene®GUT**

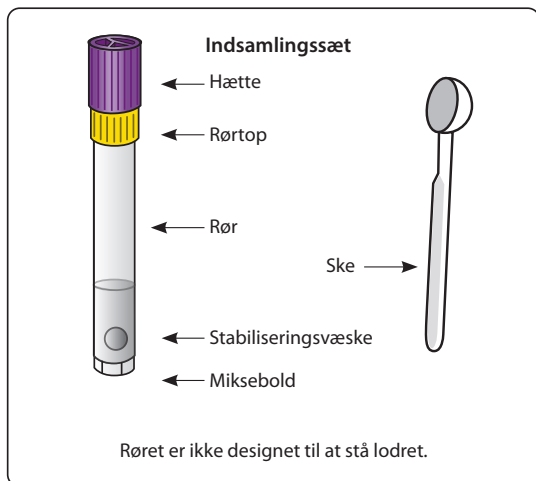

Forberedelse:

- Tøm din blære før du tager prøven.
- Tag afføringsprøven uden urin eller toiletvand.
- Toilettepapir eller servietter kan være nødvendigt.

Opsummering og beskrivelse af sættet:

OMNIGene®GUT med sketilbehør indeholder materialer og instruktioner til opsamling og stabilisering af mikrobielt DNA fra flydende fæcesprøve (svær diarré).







Advarsler og forholdsregler:

- KUN TIL UDVERTES BRUG.
- Fjern IKKE den gule rørtop fra røret.
- Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.
- Vask med vand, hvis væsken eller prøven kommer i kontakt med øjne eller hud. Må IKKE indtages.
- Små dele kan føre til kvælning.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur (15°C til 25°C), før og efter indsamling.

Forsendes i henhold til de relevante regler vedrørende transport af biologiske prøver. Se MSDS på www.dnagenotek.com

Etiketforklaring:

-  Indsamling af prøve inden (Mindst holdbar til)
-  Katalognummer
-  Producent
-  15°C / 25°C Opbevaringsinstruktioner
-  Advarsel, indhent instrukser for anvendelsen
-  Lot nummer

BRUGERVEJLEDNING

Læs alle instruktionerne før indsamlingen

Procedure:



- 1 VIGTIGE FORBEREDELSE:**
- Tøm din blære før du tager prøven.
 - Tag afføringsprøven uden urin eller toiletvand.
 - Toilettepapir eller servietter kan være nødvendigt.



- 2** Mens du holder den gule rørtop, skru KUN det violette låg af, og sæt denne til side til senere brug.



VIGTIGT:


Fjern IKKE den gule rørtop. Hæld IKKE stabiliseringsvæske ud af røret.



- 3** Tag **en skefuld** af den flydende fæcesprøve ned i toppen af det gule rør.

VIGTIGT:


Fæcesprøven kan måske ikke flyde gennem toppen af det gule rør. Fortsæt til trin nr. 4.

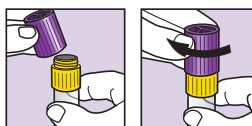

- 4** Tag den violette hætte ved den massive ende pegende nedad og skru den på den gule rørtop, indtil den er lukket godt til.



- 5** Ryst det lukkede rør så kraftigt og hurtigt som muligt frem og tilbage i mindst 30 sekunder.

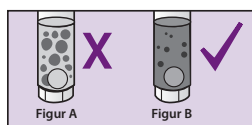

- 6** Afføringsprøven blandes sammen med stabiliseringsvæsken i røret; ikke alle partikler opløses.

VIGTIGT: Fortsæt med at ryste, hvis der er store partikler som i figur A.



- 7** Anbring skeen i den originale emballage eller pak den ind i toilettepapir, og smid den i skraldespanden.

VIGTIGT: Send prøven til behandling ved at følge de leveringsinstruktioner, der er tilvejebragt af leverandøren af sættet.

DNA genotek



Fremstillet i Canada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Bedste prøver
Bevist præstation*

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGene er et registreret varemærke fra DNA Genotek Inc.

Nogle DNA Genotek produkter fås ikke i alle geografiske regioner, kontakt din salgsrepræsentant for mere information. Alle DNA Genotek protokoller, white papers og anvendelsesnotiser er tilgængelige i supportsektoren på vores hjemmeside under www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2019 DNA Genotek Inc., et datterselskab af OraSure Technologies, Inc., alle rettigheder forbeholdes.
PD-PR-00943 (DA - Danish) Issue 1/2019-12