



### Prekawzjonijiet tal-ġbir:

**Id-donatur M'GHANDUX jiekol, jixrob, ipejje jew jomgħod iċ-chewing gum għal 30 minuta qabel jinġabar kampjun tal-bżieq.**

**Żgura li l-ponta tal-isponza MA TIĠIX f'kuntatt ma' kwalunkwe wiċċ qabel il-ġbir.**

**Użu maħsub:** ORACollect®-Dx huwa maħsub sabiex jintuża għall-ġbir mhux invażiv ta' kampjuni tal-bżieq. DNA umana mill-kampjun tal-bżieq jiġi iżolat, stabilizzat, u huwa xieraq għall-użu f'applikazzjonijiet dijanjostiċi molekulari approvati mill-FDA. Kampjuni tal-bżieq miġbura bl-użu ta' ORACollect-Dx jiġu stabilizzati u jistgħu jiġu trasportati u/jew maħżuna fit-tul f'kundizzjonijiet tal-ambjent.












**Kontenut:** Il-kitt fih likwidu għall-istabilizzazzjoni.

### Twissijiet u prekawzjonijiet:

- Rx biss. Għal użu professjonali.
- Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel il-ġbir ta' kampjun; Li ma żzommx mal-istruzzjonijiet jista' jirriżulta f'kampjun mhux xieraq u jaffettwa l-ġbir tad-DNA.
- Periklu ta' fgar. Għandha tiġi pprattikata kawzjoni meta tiddaħħal l-isponza fil-ħalq.
- Donaturi b' xerostomija (ħalq xott) ma jistgħux jiġbru kampjun adegwat bl-użu ta' dawn l-istruzzjonijiet li jirriżulta f'ġabra ta' DNA aktar baxxa u kampjun mhux adegwat għall-użu.
- Jekk il-likwidu stabilizzanti jiġi f'kuntatt mal-ġajnejn jew il-ġilda, aħsel bl-ilma. TIBLAX. Ara MSDS fuq [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

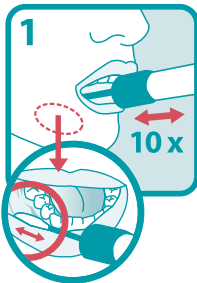


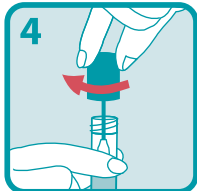
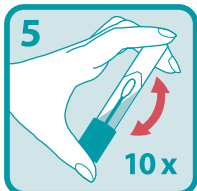
**Hażna:** 15°C-25°C

### Spjega tat-tikketta:

	Numru tal-katalogo
	Apparat mediku dijanjostiku In vitro
	Markatura CE
	Markatura UKCA
	Manifattur
	Apparat mediku
	Tergax tuża mill-ġdid
	Ikkonsulta l-istruzzjonijiet għall-użu
	Igħor kampjun sa (Uża sa)
	Numru tal-lott
	Rappreżentant Awtorizzat

## MALTI

### Proċedura għall-ġbir tal-bżieq:

	<p>Iftaħ il-pakkett u oħroġ il-kollettur mingħajr ma tmiss il-ponta tal-isponza. Daħħal l-isponza kemm jista' jkun lura fil-ħalq sakemm ikun komdu u oġhrok mal-ħanek ta' isfel (ara l-immagni mill-qrib) f'moviment 'il quddiem u lura. Orgħok il-ħanek bilmod għal 10 darbiet. Jekk possibbli, evita li toghrok is-sniien.</p>
	<p>Irrepeti l-moviment ta' għorik fuq in-naħa opposta tal-ħalq mal-ħanek ta' isfel għal 10 darbiet oħra.</p>
	<p>Żomm it-tubu wieqaf dritt sabiex tevita li l-likwidu ta' stabilizzazzjoni joħroġ minn ġot-tubu. HOLL it-tapp il-blu minn mat-tubu tal-ġbir mingħajr ma tmiss l-isponza.</p>
	<p>Aqleb it-tapp rasu 'l isfel, daħħal l-isponza fit-tubu u għalqa t-tapp sewwa.</p>
	<p>Aqleb it-tubu bit-tapp u qaqlqu malajr minn naħa għall-oħra malajr għal 10 darbiet.</p>



Għal Użu Dijanjostiku In Vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, In-Netherlands

Persuna Responsabbli tar-Renju Unit Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor Awstraljan: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 L-Awstralja

ORACollect hija trademark rreġistrata u DNA Genotek hija trademark ta' DNA Genotek Inc. Xi prodotti DNA Genotek jistgħu ma jkunux disponibbli fir-reġjuni ġeografici kollha, ikkuntatta r-rappreżentant tal-bejgħ tiegħek għad-dettalji. Il-protokoll, white papers u noti tal-applikazzjoni ta' DNA Genotek huma disponibbli fit-taqsimat tal-ġajjnuna tas-sit web tagħna fuq [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Privattiva ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
 © 2021 DNA Genotek Inc., sussidjarja ta' OraSure Technologies, Inc., id-drittijiet kollha riżervati.  
 PD-PR-01137 (MT - Maltese) Issue 2/2021-04

**DNAGENOTEK™**

*Kampjuni superjuri  
 Prestazzjoni pruvata*

■ DNA Genotek Inc.  
 3000 - 500 Palladium Drive  
 Ottawa, ON, IL-Kanada K2V 1C2

Bla Hlas (Amerika ta' Fuq): 1.866.813.6354  
 Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)