

Určené použití: K asistovanému odběru lidské DNA ze vzorků slin.

Obsah: Sada obsahuje stabilizační tekutinu.

Upozornění a opatření:

Nebezpečí udušení:

- Odběrová sada obsahuje malý uzávěr.
- Plastový sáček obsahuje hubky.
- Při vložení hubky do úst dárce je nutno postupovat opatrně.

Pro odběr pod dohledem:

- NENECHÁVEJTE dárce bez dohledu.
- NEDOVOLTE dárce manipulovat hubkou, uzávěrem nebo obalem.
- Pokud se stabilizační tekutina dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. Nepožívejte. Podívejte se na bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenotek.com.

Uchovávání: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

Shrnutí a vysvětlení k sadě:

ORAgene-Dx je sada k asistovanému odběru vzorků, obsahující materiály a pokyny k odběru a stabilizaci vzorků slin.

Příprava k odběru:

NESNÍMEJTE plastovou fólii z víčka nálevky.

Než vložíte hubku do úst dárce, vždy zkontrolujte, jestli není poškozená. Jestliže jsou na ní jakékoli známky opotřebení nebo poškození, použijte druhou hubku.

NEPOUŽÍVEJTE namísto ní jiné hubky nebo tampony.

Legenda ke štítku:

REF	Katalogové číslo
IVD	Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro
CE	Označení CE
UKA	Označení UKCA
MD	Výrobce
MD	Zdravotnický prostředek
⊗	Nepoužívejte opakovaně
i	Přečtěte si pokyny k použití
⌚	Odeberte vzorek slin do (použitelné do)
LOT	Číslo šarže
EC REP	Pověřený zástupce
⚠	Upozornění

Pokyny pro uživatele


Před odběrem vzorků si přečtěte všechny pokyny.

Postup:


Po dobu 30 minut před odběrem vzorku slin dárce NESMÍ jíst, pít, kouřit nebo žvýkat žvýkačku.

Při odebrání vzorku musí být dárce ve vzpřímené poloze.


Odběr vzorku slin podle kroků 1 až 7 může vyžadovat až 15 minut.

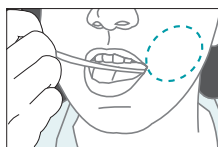

- 1** Vložte jednu hubku mezi vnitřní stranu tváře a dásně. Zlehka pohybujte hubkou po dásni a vnitřní straně tváře po 30 sekund, aby do ní nasáklo co nejvíce slin.

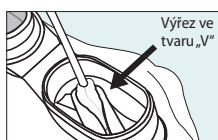


- 2** Až bude hubka nasycena slinami, vložte ji do výřezu ve tvaru „V“ na nálevce. Vyždímejte sliny z hubky tak, že ji budete otáčet a přitlačovat ji k vnitřní stěně výřezu. Sliny budou stékat do zkumavky.

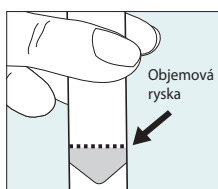

- 3** Opakujte tyto kroky (1 a 2) S POUŽITÍM STEJNÉ HUBKY, dokud tekuté sliny (nikoli bublinky) nedosáhnou po objemovou rysku. Než vložíte hubku do úst dárce, vždy zkontrolujte, jestli není poškozená. Jestliže jsou na ní jakékoli známky opotřebení nebo poškození, použijte druhou hubku.


Poklepejte dnem zkumavky o tvrdý povrch, aby se zmenšilo množství bublinek.

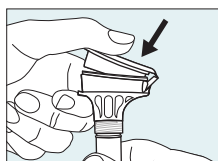


- 4** Jednou rukou držte zkumavku ve svislé poloze. Druhou rukou zavřete pevným stlačením víčko, dokud hlasitě nezaklapne. Z víčka se uvolní tekutina a steče do zkumavky, kde se promísí se slinami. Ujistěte se, že je víčko pevně zavřené.



- 5** Držte zkumavku ve svislé poloze. Odšroubujte nálevku od zkumavky.

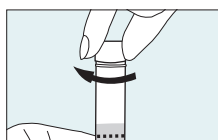

- 6** Zavřete pevně zkumavku malým uzávěrem.

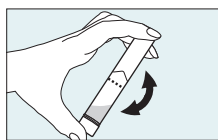

- 7** Uzavřenou zkumavku protřepávejte po 5 sekund. Zlikvidujte nálevku a hubky.

Dodatečné pokyny k použití PD-HB-00001 naleznete na webu www.dnagenotek.com

Pro diagnostiku in vitro    
Na předpis a k přímému spotřebitelskému použití

DNagenotek[™]

*Vynikající vzorky
Osvědčené provedení*

Vyrobeno v Kanadě
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Bezplatné telefonní číslo (Severní Amerika):
1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

  Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Nizozemsko

Odpovědná osoba ve Spojeném království: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Australský sponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrálie

ORAgene je registrovaná ochranná známka a DNA Genotek je ochranná známka společnosti DNA Genotek Inc. Některé produkty společnosti DNA Genotek nemusí být dostupné ve všech geografických oblastech. Bližší údaje vám sdělí prodejní zástupce.

Veškeré protokoly společnosti DNA Genotek, její bílé knihy a poznámky k aplikaci jsou k dispozici v sekci podpory na našich webových stránkách www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

©2021 DNA Genotek Inc., dceřiná společnost OraSure Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena. PD-PR-01164 (CZ - Czech) Issue 1/2021-05