

**Rendeltetés szerű használat:** Emberi DNS asszisztált gyűjtésére szolgál nyálmintából.

**Tartalom:** A készlet stabilizáló folyadékot tartalmaz.

**Figyelmeztetések és óvintézkedések:**

**Fulladásveszély:**

- Kis kupak a gyűjtőkészletben.
- Szivacsokat tartalmazó műanyag zacskó.
- A szivacsot fokozott óvatossággal kell a donor szájába helyezni.

**Felügyelt gyűjtésekhez:**

- NE hagyja a donort felügyelet nélkül.
- NE engedje a donornak a szivacs, a kis kupak vagy a csomagolás kezelését.
- Ha a stabilizáló folyadék érintkezik a szemmel vagy bőrrel, mossa le vízzel. Ne nyelje le. Az anyagbiztonsági adatlapot a [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) honlapon tekintheti meg.

**Tárolás:** 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)

**Összefoglaló és a készlet magyarázata:**

Oragene-Dx egy olyan asszisztált gyűjtőkészlet, amely tartalmazza a nyálminták gyűjtéséhez és stabilizálásához szükséges anyagokat és utasításokat.













**Mintagyűjtési óvintézkedések:**

**NE távolítsa el a műanyag fóliát a tölcser fedeléről.**

**Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába helyezné, ellenőrizze a szivacsot, hogy nem sérült-e. Ha az első szivacs kopás vagy elhasználódás bármilyen jelét mutatja, használja a második szivacsot.**

**NE helyettesítse egyéb szivacsokkal vagy törlőkkel.**

**A címkén lévő jelmagyarázat:**

-  Katalógusszám
-  In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz
-  CE-jelölés
-  UKCA-jelölés
-  Gyártó
-  Orvosi eszköz
-  Ne használja újra
-  Olvassa el a használati utasítást
-  Nyál gyűjtése (Használat)
-  Tételszám
-  Meghatalmazott képviselő
-  Vigyázat

## Használati utasítás

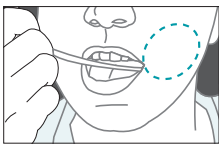

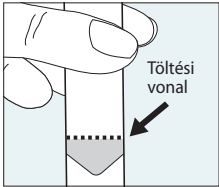
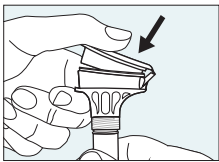
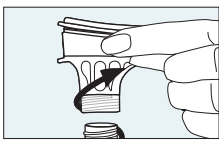
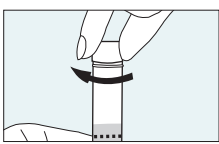
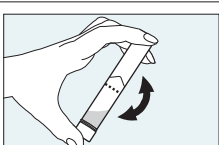
A gyűjtés előtt olvassa el az összes utasítást.

**Eljárás:**




**Győződjön meg arról, hogy a donor NEM eszik, iszik, dohányzik vagy rágózik 30 perccel a nyálminta gyűjtése előtt.**

**Győződjön meg arról, hogy a donor függőleges helyzetben van a mintagyűjtés során.**

**Legfeljebb 15 percet vehet igénybe a nyálminta begyűjtése az 1–7. lépéseket követve.**

	<p><b>1</b> Helyezzen egy szivacsot a pofazacskóba. Óvatosan mozgassa a szivacsot az íny és a pofazacskó belső oldala mentén 30 másodpercig, hogy a lehető legtöbb nyálát felitassa.</p>
	<p><b>2</b> Amint a szivacs megtelítődött nyállal, helyezze a szivacsot a tölcser V alakú bemetszésébe. Csavarja ki a nyálát a szivacsból a V alakú bemetszés belső falára irányuló csavaró és toló mozdulattal. A nyál a csőbe folyik.</p>
	<p><b>3</b> Ismétlje meg ezeket a lépéseket (1–2) UGYANANNAK A SZIVACSNAK A HASZNÁLATÁVAL, amíg a folyékony nyál (nem buborékok) el nem éri a töltési vonalat. Minden alkalommal, mielőtt a donor szájába helyezné, ellenőrizze a szivacsot, hogy nem sérült-e. Ha az első szivacs kopás vagy elhasználódás bármilyen jelét mutatja, használja a második szivacsot.  A cső alját ütögesse kemény felszínhez a buborékok számának csökkentésére.</p>
	<p><b>4</b> Egyik kezével tartsa függőlegesen a csövet. Csuksa be a fedelet a másik kezével úgy, hogy erősen nyomja a fedelet, amíg egy hangos kattantást nem hall. A fedélben lévő színezett folyadék a csőbe jut, és összekeveredik a nyállal. Győződjön meg arról, hogy a fedél szorosan le van zárva.</p>
	<p><b>5</b> Tartsa függőlegesen a csövet. Csavarja le a tölcser a csőről.</p>
	<p><b>6</b> A kis kupak segítségével zárja le szorosan a csövet.</p>
	<p><b>7</b> Rázza 5 másodpercig a kupakkal lezárt csövet. Dobja ki a tölcser és a szivacsokat.</p>

Lásd a PD-HB-00001 további használati utasítását a [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) címen.

In vitro diagnosztikai használatra    Vényre és közvetlen fogyasztói felhasználásra

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Hollandia

Egyesült Királyság felelős személye: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park, Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Ausztráliai szponzor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Ausztrália

Az Oragene a DNA Genotek Inc. bejegyzett védjegye, a DNA Genotek pedig a DNA Genotek Inc. védjegye. Előfordulhat, hogy néhány DNA Genotek termék nem kapható minden földrajzi régióban; a részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kereskedelmi képviselőjével.

Minden DNA Genotek protokoll, fehér könyv és felhasználási információ megtalálható a honlapunk segítségnyújtás részében a [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) címen.

Szabadalom ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

©2021 DNA Genotek Inc., az OraSure Technologies, Inc. leányvállalata, minden jog fenntartva.

PD-PR-01172 (HU - Hungarian) Issue 1/2021-05