

Użu maħsub: Għall-ġbir assistit ta' DNA umana minn kampjuni tal-bżieq.

Kontenuti: Il-kitt fih likwidu stabilizzanti.

Twissijiet u prekawzjonijiet:

Perikli ta' fgar:

- Tapp żgħir fil-kitt tal-ġbir.
- Borża tal-plastik li fiha l-isponża.
- Għandha tintuża attenzjoni meta tiddaħhal sponża fil-ħalq tad-donatur.

Għal ġbir taħt superviżjoni:

- THALLIX lid-donatur waħdu.
- THALLIX lid-donatur imiss l-isponża, it-tapp iż-żgħir jew il-pakkett.
- Jekk il-likwidu stabilizzanti jiġi f'kuntatt mal-għajnejn jew il-ġilda, aħsel bl-ilma. Tiblax. Ara l-MSDS fuq www.dnagenotek.com.

Hażna: 15°C-30°C (59°F-86°F)

Taqsis u spjegazzjoni tal-kitt:

Oragene-Dx huwa kitt tal-ġbir assistit li jipprovdi l-materjali u l-istruzzjonijiet għall-ġbir u l-istabilizzar ta' kampjuni tal-bżieq.


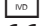








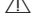

Prekawzjonijiet tal-ġbir:

Tneħħix il-kisja tal-plastik mill-għatu tal-lemput.

Iċċekkja l-isponża għal ħsarat kull darba qabel iddaħhalha f'ħalq id-donatur. Uża t-tieni sponża jekk l-ewwel sponża turi kwalunkwe sinjali ta' tkagħbir.

TPARTATX ma' sponoż jew swabs oħrajn.

Leggenda tat-tikketta:

-  Numru tal-katalogo
-  Apparat mediku dijanjostiku in vitro
-  Markatura CE
-  Markatura UKCA
-  Manifattur
-  Apparat mediku
-  Terġax tuża
-  Ikkonsulta l-istruzzjonijiet qabel l-użu
-  Iġbor il-bżieq sa (Uża sa)
-  Numru tal-lott
-  Rappreżentant Awtorizzat
-  Attenzjoni

Istruzzjonijiet tal-Utent

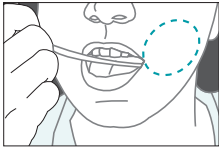
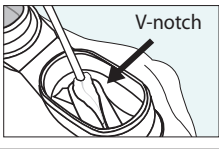
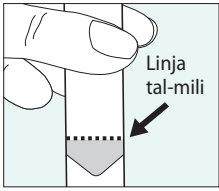
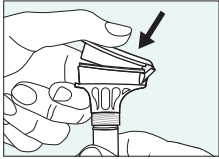
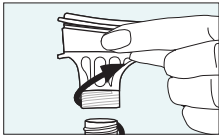
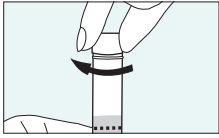
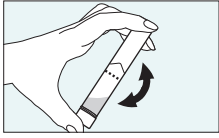
Aqra l-istruzzjonijiet kollha qabel il-ġbir.

Proċedura:




Żgura li d-donatur MA jiekolx, jixrobx, ipejjiwx jew jomgħodx iċ-chewing gum għal 30 minuta qabel jingabar kampjun tal-bżieq.

Żgura li donatur ikun f'pożizzjoni wieqfa waqt il-ġbir ta' kampjun.

Ġbir ta' kampjun jista' jieħu sa 15-il minuta jekk issegwi passi 1 sa 7.

	<p>1 Qiegħed sponża waħda fil-borża tal-ħadd. Bilmod ċaqłaq l-isponża matul il-ħanek u l-ħadd minn ġewwa għal madwar 30 sekonda sabiex tiġbor kemm tista' bżieq.</p>
	<p>2 Ladarba l-isponża tkun mimlija bżieq, daħhal l-isponża fil-V-notch tal-lemput. Aghsar il-bżieq minn ġol-isponża billi tuża moviment ta' riwi u mbuttara kontra l-ħajt ta' ġewwa tal-V-notch. Il-bżieq ser jidhol fit-tubu.</p>
	<p>3 Irrepeti dawn il-passi (1 sa 2) BL-UŻU TAL-ISTESS SPONŻA sakemm il-bżieq likwidu (mhux bżieqzaq) jasal sal-linja tal-mili. Iċċekkja l-isponża għal ħsarat kull darba qabel iddaħhalha f'ħalq id-donatur. Uża t-tieni sponża jekk l-ewwel sponża turi kwalunkwe sinjali ta' tkagħbir. Taptap il-qiegħ tat-tubu kontra wiċċ iebes biex tnaqqas in-numru ta' bżieqzaq.</p>
	<p>4 Żomm it-tubu wieqaf b'id waħda. Aghlaq l-għatu bl-id l-oħra billi tagħfas sew l-għatu sakemm tisma' ħoss ta' klikk qawwi. Il-likwidu fl-għatu ser jiġi rilaxxat fit-tubu biex jithallat mal-bżieq. Kun cert li l-għatu magħluq sewwa.</p>
	<p>5 Żomm it-tubu dritt. Holl il-lemput minn mat-tubu.</p>
	<p>6 Uża it-tapp iż-żgħir biex tagħlaq it-tubu sewwa.</p>
	<p>7 Ċaqłaq minn naħa għall-oħra t-tubu bit-tapp għal 5 sekondi. Armi l-lemput u l-isponoż.</p>

Ara l-istruzzjonijiet għall-użu addizzjonali PD-HB-00001 fuq www.dnagenotek.com

Għal Użu Diyanjostiku In Vitro   

Għal użu Dirett lill-Konsumatur u fuq Riċetta

DNAGENOTEK™

*Kampjuni superjuri
Prestazzjoni ppruvata*

Magħmul il-Kanada
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Il-Kanada K2V 1C2

Mingħajr ħlas (Amerika ta' fuq): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

  Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, In-Netherlands

Persuna Responsabbil tar-Renju Unit: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor Awstraljan: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 l-Awstralja

Oragene hija trademark rreġistrata u DNA Genotek hija trademark ta' DNA Genotek Inc.

Xi prodotti ta' DNA Genotek jistgħu ma jkunux disponibbli fir-reġjunijiet ġeografici kollha; ikkuntattja r-rappreżentant tal-bejgħ tiegħek għad-dettalji.

Il-protokoll, white papers u noti ta' applikazzjoni kollha ta' DNA Genotek huma disponibbli fit-taqsim tal-għajruna tas-sit web tagħna www.dnagenotek.com.

Privattiva (www.dnagenotek.com/legalnotices)

©2021 DNA Genotek Inc., sussidjarja ta' OraSure Technologies, Inc., id-drittijiet kollha riżervati.

PD-PR-01177 (MT - Maltese) Issue 1/2021-05