

Zamýšľané použitie: Na asistované získanie ľudskej DNA zo vzorky slín.

Obsah: Súprava obsahuje stabilizačnú tekutinu.

Upozornenia a opatrenia:

Nebezpečenstvo udusenía:

- Malý uzáver v odberovej súprave.
- Plastové vrecko obsahuje špongie.
- Pri vkladaní špongie do úst je potrebná zvýšená opatrnosť.

Na odber pod odborným dohľadom:

- NENECHÁVAJTE darcu bez dohľadu.
- NENECHAJTE darcu, aby sám manipuloval so špongiou, malým uzáverom alebo balením.
- Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou, opláchnite ich vodou. Nepreháňajte. Kartu bezpečnostných údajov MSDS nájdete na www.dnagenetek.com.

Uskladnenie: 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

Súhrnné informácie a vysvetlenie k súprave:

Produkt Otagene-Dx je súprava na asistovaný odber, ktorá zabezpečuje materiál a pokyny na odber a stabilizáciu ľudských vzoriek slín.

Upozornenia k odberu:

NEODSTRAŇUJTE plastovú fóliu z viečka lievika.

Predtým, ako vložíte špongiu do úst darcu, vždy skontrolujte, či nie je poškodená. Pokiaľ prvá špongia vykazuje akékoľvek znaky opotrebovania, použite druhú špongiu.

NENAHŔADZAJTE inými špongiami alebo tampónmi.

Legenda k štítku:

REF	Katalógové číslo
MD	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
CE	Označenie CE
UK	Označenie UKCA
MD	Výrobca
MD	Zdravotnícka pomôcka
MD	Nepoužívajte opakovan
MD	Prečítajte si návod na použitie
MD	Sliny odoberte do (Spotrebujte do)
LOT	Číslo šarže
EC REP	Oprávnený zástupca
MD	Upozornenie

Na diagnostické použitie in vitro   

Na predpis a priame použitie spotrebiteľa

DNAGENETEK™

Vyrobené v Kanade
DNA Genetek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

*Kvalitné vzorky
Overené vlastnosti*

Bezplatné číslo (Severná Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com
www.dnagenetek.com

Návod na použitie

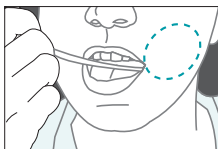
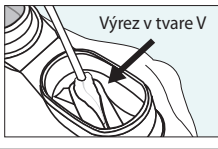
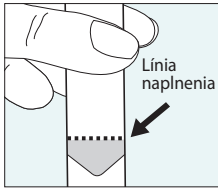
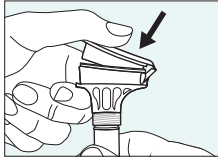
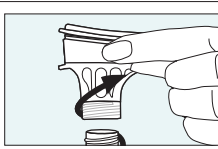
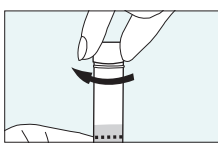
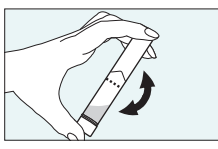
Pred odberom si prečítajte všetky pokyny.

Postup:

Presvedčte sa, že darca 30 minút pred odberom vzorky slín NEJEDOL, NEFAČIL a NEŽUL ŽUVÁČKU.

Zabezpečte, aby bol darca pri odbere vzorky vo vzpriamenej polohe.

Odber vzorky slín podľa krokov 1 až 7 môže trvať do 15 minút.

	1 Vložte jednu špongiu do úst v mieste líca. jemne obtierajte špongiou o časť a vnútro líca 30 sekúnd, aby vsiakla čo najväčší objem slín.
	2 Keď je špongia nasiaknutá slinami, vložte ju do výrezu lievika v tvare V. Vyžmýkajte sliny zo špongie krúžením a zatláčaním oproti vnútornej stene výrezu v tvare V. Sliny stečú do skúmavky.
	3 Opakujte tieto kroky (1 až 2) POMOCOU TEJ ISTEJ ŠPONGIE, kým tekuté sliny (nie bubliny) nedosiahnu až po označenú líniu. Predtým, ako vložíte špongiu do úst darcu, vždy skontrolujte, či nie je poškodená. Pokiaľ prvá špongia vykazuje akékoľvek znaky opotrebovania, použite druhú špongiu. Poklepte dnom skúmavky po tvrdom povrchu, aby sa zredukovalo množstvo bublín.
	4 Podržte skúmavku vzpriamene v jednej ruke. Silno zatlačte na viečko druhou rukou, aby ste ho uzavreli, až kým nebudete počuť hlasné kliknutie. Tekutina vo viečku sa uvoľní do skúmavky a zmieša sa so slinami. Presvedčte sa, že je viečko pevne uzavreté.
	5 Podržte skúmavku vzpriamene. Odsrutkujte lievik od skúmavky.
	6 Malým uzáverom pevne uzavrite skúmavku.
	7 Zatvorenú skúmavku potraсте, asi 5 sekúnd. Lievik a špongie vyhodte.

Ďalšie pokyny na použitie produktu PD-HB-00001 nájdete na www.dnagenetek.com

EC REP Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holandsko

Zodpovedný subjekt za Spojené kráľovstvo: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Garant za Austráliu: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

Otagene je registrovaná ochranná známka a DNA Genetek je ochranná známka spoločnosti DNA Genetek Inc. Niektoré produkty spoločnosti DNA Genetek nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach; podrobné informácie vám poskytne váš obchodný zástupca. Všetky protokoly, biele knihy a poznámky k použitiu produktov spoločnosti DNA Genetek sú k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii podpory na adrese www.dnagenetek.com.

Patent (www.dnagenetek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genetek Inc., dcérska spoločnosť OraSure Technologies, Inc., všetky práva vyhradené.
PD-PR-01181 (SK - Slovak) Issue 1/2021-05