


Precauções para a recolha:

Garanta que a ponta da esponja NÃO toca em nenhuma superfície antes da recolha.

O dador NÃO pode comer, beber, fumar ou mascar pastilha elástica durante os 30 minutos que antecedem a recolha da amostra oral.

Fim a que se destina: Este produto foi concebido para a recolha e estabilização de ADN a partir de fluidos orais humanos.

Conteúdo: Contém 1 kit de recolha.

Aviso e precauções: Risco de asfixia. Cuidado ao inserir a esponja na boca.

Lavar com água se o líquido entrar em contacto com os olhos ou a pele. Não ingira. Ver a ficha de dados de segurança em www.dnagenotek.com.

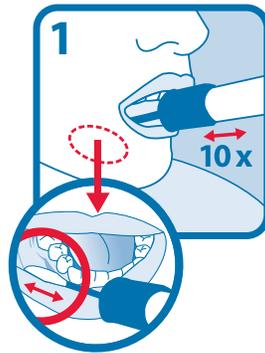
Armazenamento: 15-25°C

Sumário e explicação do kit:

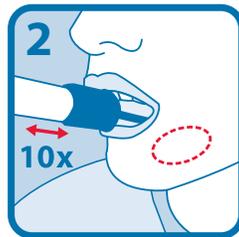
ORACollect-DNA é um kit de auto-recolha que fornece os materiais e instruções para a recolha de amostras orais humanas.

Legenda da etiqueta:

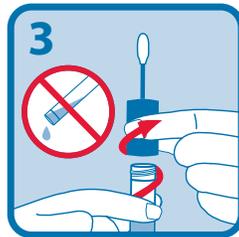
	Número de catálogo
	Dispositivo médico de diagnóstico "in vitro"
	Marca CE
	Fabricante
	Representante autorizado
15°C-25°C	Instruções de armazenamento
	Coletar a amostra até (data de validade)
	Número de lote

Instruções para a recolha de amostras:


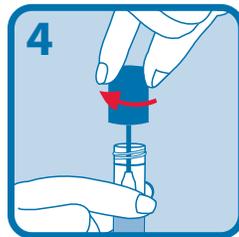
Abra a embalagem e retire o colector sem tocar na ponta da esponja. Coloque a esponja o mais atrás na boca que lhe seja confortável e esfregue ao longo das gengivas inferiores (veja a imagem com o pormenor) num movimento para trás e para a frente. Esfregue suavemente as gengivas 10 vezes. Se possível, evite esfregar os dentes.



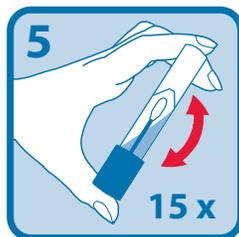
Repita suavemente o movimento de esfregar do lado oposto da boca ao longo das gengivas inferiores durante mais 10 vezes.



Mantenha o tubo direito para evitar que o líquido no seu interior se entorne. Desaperte a tampa azul do tubo de recolha sem tocar na esponja.



Vire a tampa a contrário, insira a esponja no tubo e feche bem a tampa.



Vire ao contrário o tubo fechado com a tampa e agite vigorosamente 15 vezes.



Para a utilização em diagnóstico "in vitro"



*Amostras de qualidade superior
Desempenho comprovado*

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

ORACollect*-DNA não se encontra disponível para venda nos Estados Unidos.

*ORACollect é uma marca comercial registada da DNA Genotek Inc.

Alguns produtos DNA Genotek poderão não estar disponíveis em todas as regiões geográficas, contacte o seu representante de vendas para obter mais detalhes.

Todos os protocolos, documentos técnicos e notas explicativas da DNA Genotek estão disponíveis na secção de apoio do nosso website em www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2019 DNA Genotek Inc., uma subsidiária da OraSure Technologies, Inc., todos os direitos reservados.
PD-PR-00395 (PT - Portuguese) Issue 2/2019-10