


# OM-AC2 勺子附件

与  OMNIGene®-GUT 配合使用

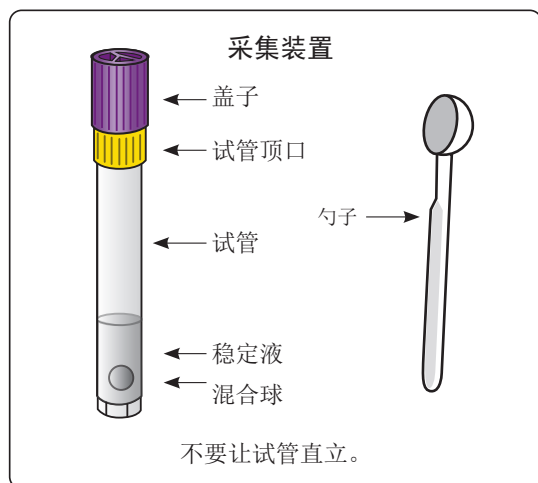

## 准备工作:

- 开始采集前排空膀胱。
- 采集不带有尿液或马桶水的粪便样本。
- 可能需要厕纸或纸巾。

## 检验包概要和说明:

OMNIGene®-GUT提供采集和稳定液体粪便样本(严重腹泻)中微生物DNA的材料和说明,内附勺子附件。






## 警告与注意事项:

- 仅限外用。
- 请勿从试管取下黄色的试管顶口。
- 请勿洒出试管中的稳定液。
- 如果液体或样本与眼睛或皮肤接触,请用水清洗。切勿摄入。
- 小物件可能有造成窒息的危险。

储存条件: 15°C-25°C

按照生物样本运输的相关规定进行运输。参见[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)的MSDS

## 标签图例:

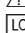-  样本采集时间(有效期)
-  目录编号
-  生产商
- 15°C / 25°C 储存说明
-  注意, 请查阅使用说明
-  批号

## 用户说明

采集前, 请阅读所有说明

### 步骤:



- 1 重要准备工作:**
- 开始采集前排空膀胱。
  - 采集不带有尿液或马桶水的粪便样本。
  - 可能需要厕纸或纸巾。



- 2** 在握住黄色试管顶口的同时, 只松开紫色盖子, 并放在一边供以后使用。



**重要注意事项:**  
请勿取下黄色试管顶口。  
请勿洒出试管中的稳定液。



- 3** 将一勺液体粪便样本转移到黄色试管顶口。


**重要注意事项:**  
粪便样本不能流过黄色试管顶口。  
继续执行第4步。



- 4** 把紫色盖子的实心一端面朝下方, 重新盖到黄色试管顶口上, 旋紧



- 5** 用力快速地来回晃动密封试管至少30秒。

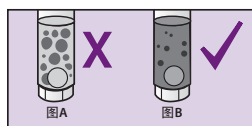

- 6** 粪便样本将与试管中的稳定液混合在一起, 并非所有的颗粒都会溶解。

**重要注意事项:** 若仍有大颗粒未溶解(如图 A 所示), 请继续摇晃。



- 7** 将勺子放在原包装中, 或包在卫生纸内并丢弃在垃圾中。

**重要注意事项:** 按照检验包供应商提供的寄送说明, 寄送要处理的样本。

**DNA genotek**

加拿大制造  
生产企业/备案人: DNA Genotek Inc.  
生产地址/备案人住所:  
3000 - 500 Palladium Drive,  
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757  
传真: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。  
某些 DNA Genotek 产品可能不向所有地区销售, 详情可咨询您的销售代表。  
在我们网站 [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) 的技术支持专区, 可查阅所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用记录。

专利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2020 OraSure Technologies, Inc. 旗下公司 DNA Genotek Inc., 保留所有权利。  
PD-PR-00780 (ZH - Chinese) Issue 3/2020-08