

# OM-AC1 toaletttilbehør

Brukes sammen med  **OMNigene®GUT**


## BRUKSANVISNING

Dette toaletttilbehøret brukes sammen med OMNigene®GUT-settet for å lette innsamlingen av fekalprøver.


**Forsiktig:** IKKE la toalett vann, urin, rengjøringsmiddel eller duft komme i kontakt med dette toaletttilbehøret.

**Oppbevaring:** 15°C til 25°C


### Fremgangsmåte:

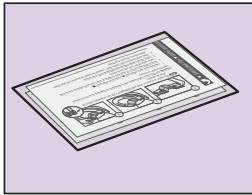


- 1** Det følger med to toaletttilbehør i tilfelle du ikke klarer å samle inn en prøve på det første forsøket.

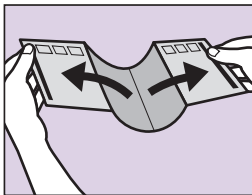


- 2** Dra forsiktig i flikene med ▲; gjenta for fliker med ■.

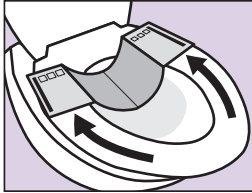

- 3** Fest tilbehørets klistrete overflate til **BAKSIDEN** av toalettsetet med klistretet nære den ytre kanten av setet og trykk godt fast

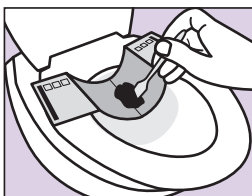

- 4** Samle fekalprøve ved å følge bruksanvisningen til OMNigene®GUT.

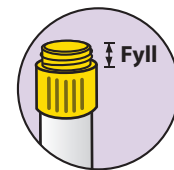

- 5** Kast brukt tilbehør i toalettet. Vent 1 minutt til papiret blir mykt, deretter trekk ned. Du kan også kaste det i søppelet.

1 minutt

**DNA genotek**



OM-AC1 er laget i Nederland for DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Førsteklasses prøver  
Bevist ytelse*

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNigene er et registrert varemerke for DNA Genotek Inc.

Noen DNA Genotek-produkter er kanskje ikke tilgjengelige i alle geografiske områder, kontakt din salgsrepresentant for detaljer.

Alle DNA Genotek-protokoller, retningslinjer og søknadsnotater er tilgjengelig under hjelpedelen på hjemmesiden vår [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2018 DNA Genotek Inc., et datterselskap av OraSure Technologies, Inc., med enerett.  
PD-PR-00796 (NO - Norwegian) Issue 1/2018-07

