


# OM-AC2 lepelaccessoire

Gebruikt met  **OMNIGENE®GUT**

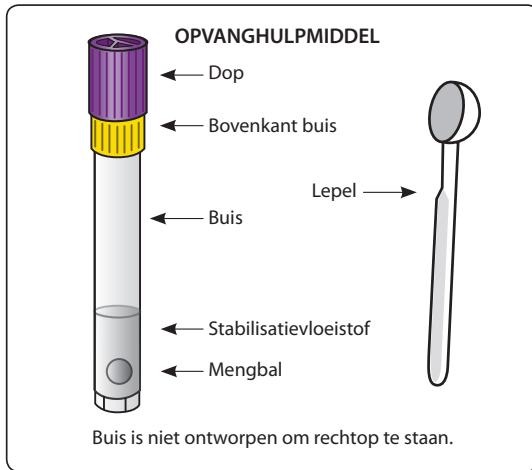

## Vorbereiding:

- **Leeg uw blaas voordat met afname wordt begonnen.**
- **Vang het fecesmonster op, zonder urine of wc-water.**
- **Toilet papier of papieren zakdoekjes kunnen nodig zijn.**

## Samenvatting en uitleg van de kit:

OMNIGENE®GUT met lepelaccessoire bevat de materialen en instructies voor het afnemen en stabiliseren van microbiële DNA uit een vloeibaar fecesmonster (ernstige diarree).




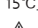
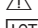

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- **UITSLUITEND VOOR UITWENDIG GEBRUIK.**
- De gele bovenkant van de buis **NIET** verwijderen.
- De stabilisatievloeistof in de buis **NIET** morsen.
- Met water wassen als de vloeistof of het monster in contact komt met de ogen of de huid. **NIET** inslikken.
- Kleine voorwerpen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

**Opslag:** 15 °C tot 25 °C

Verzenden conform de geldende regelgeving voor het vervoer van biologische monsters. Zie VIB op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).


## Legenda bij etiket:

-  Monster uiterlijk afnemen op (uiterste gebruiksdatum)
-  Catalogusnummer
-  Fabrikant
-  15°C / 25°C Instructies voor opslag
-  Let op, raadpleeg gebruiksaanwijzing
-  Lotnummer

## GEBRUIKSINSTRUCTIES

Lees vóór de afname alle instructies

### Procedure:

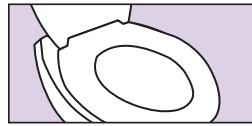

- 1 BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN:**
- Leeg uw blaas voordat met afname wordt begonnen.
  - Vang het fecesmonster op, zonder urine of wc-water.
  - Toilet papier of papieren zakdoekjes kunnen nodig zijn.



- 2** Houd de gele bovenkant van de buis vast, schroef **ALLEEN** de paarse dop los en leg deze weg voor later gebruik.



### BELANGRIJK:


De gele bovenkant van de buis **NIET** verwijderen. De stabilisatievloeistof in de buis **NIET** morsen.



- 3** Breng **één lepel** vloeibaar fecesmonster aan in de buis met gele dop.

### BELANGRIJK:


Het fecesmonster loopt mogelijk niet door de buis met gele dop. Ga door met stap 4.

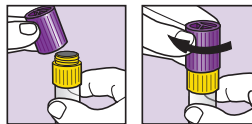

- 4** Pak de paarse dop vast met het harde uiteinde omlaag gericht en draai de dop stevig op de gele bovenkant van de buis.



- 5** Schud de afgesloten buis zo hard en snel mogelijk heen en weer gedurende minimaal 30 seconden.

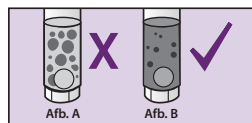

- 6** Het fecesmonster wordt in de buis met de stabilisatievloeistof gemengd; niet alle deeltjes lossen op.

**BELANGRIJK:** Blijf schudden als er grote deeltjes overblijven, zoals weergegeven in afbeelding A.



- 7** Plaats de lepel in de originele verpakking of wikkel deze in toilet papier en gooi hem weg met het afval.

**BELANGRIJK:** Stuur het monster op ter verwerking volgens de leverinstructies die door de leverancier van de kit zijn gegeven.

**DNA genotek**  


Geproduceerd in Canada  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Superieure monsters  
Bewezen resultaten*

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGENE is een gedeponieerd handelsmerk van DNA Genotek Inc.  
Sommige DNA Genotek producten zijn mogelijk niet in alle geografische regio's verkrijgbaar, neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.  
Alle DNA Genotek producten, technische documentatie en toepassingsaantekeningen zijn beschikbaar in het onderdeel 'support' van onze website op [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Octrooi ([www.dnagenotek.com/legal/notices](http://www.dnagenotek.com/legal/notices))  
© 2018 DNA Genotek Inc., een dochteronderneming van OraSure Technologies, Inc., alle rechten voorbehouden.  
PD-PR-00821 (NL - Dutch) Issue 1/2018-08