


OM-AC2 – doplňková lžička POKYNY K POUŽITÍ

K použití s  **OMNIGENE®GUT**

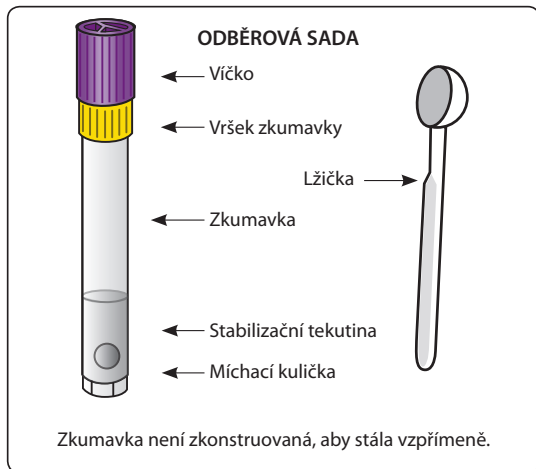

Příprava:

- Před zahájením odběru se vymočte.
- Odeberte vzorek stolice bez moči a vody z toalety.
- Může být potřeba toaletní papír nebo ubrousky.

Shrnutí a vysvětlení k sadě:

Sada OMNIGENE®GUT s doplňkovou lžičkou poskytuje materiály a pokyny k odběru a stabilizaci mikrobiální DNA ze vzorku tekuté stolice (při těžkém průjmu).







Varování a opatření:

- POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.
- NEODSTRAŇUJTE ze zkumavky žlutý vršek.
- NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky.
- Pokud se tekutina nebo vzorek dostane do kontaktu s očima nebo pokožkou, omyjte je vodou. NEPOŽÍVEJTE.
- Drobné předměty mohou představovat nebezpečí udušení.

Skladování: 15 °C až 25 °C


Posílejte v souladu s platnými předpisy pro přepravu biologických vzorků. Viz bezpečnostní list (MSDS) na webu www.dnagenetek.com

Legenda ke štítku:

-  Odeberte vzorek do (použijte do)
-  Katalogové číslo
-  Výrobce
-  15°C / 25°C Skladovací pokyny
-  Pozor, přečtěte si pokyny k použití
-  Číslo šarže

Před odběrem si přečtěte všechny pokyny

Postup:

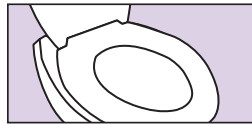

1 DŮLEŽITÁ PŘÍPRAVA:

- Před zahájením odběru se vymočte.
- Odeberte vzorek stolice bez moči a vody z toalety.
- Může být potřeba toaletní papír nebo ubrousky.



2 Držte žlutý vršek zkumavky a odšroubujte POUZE fialové víčko, které odložte pro pozdější použití.

DŮLEŽITÉ:

NEODSTRAŇUJTE žlutý vršek zkumavky. NEVYLÉVEJTE stabilizační tekutinu ze zkumavky.




Nerozlijte obsah




3 Přeneste jednu lžičku vzorku tekuté stolice do žlutého vršku zkumavky.

DŮLEŽITÉ:


Může se stát, že vzorek stolice neproteče žlutým vrškem zkumavky. Přejděte ke kroku 4.

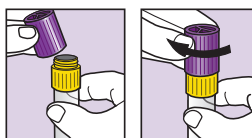

4 Vezměte fialové víčko tak, aby konec s plnou plochou směřoval dolů, a pevně je našroubujte na žlutý vršek zkumavky.

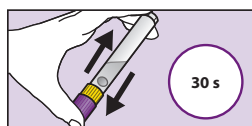


5 Co nejrychleji a nejsilněji zavřenou zkumavkou třepete sem a tam alespoň 30 sekund.

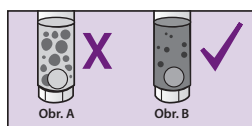

6 Vzorek stolice se promíchá se stabilizační tekutinou ve zkumavce. Ne všechny částice se rozpustí.

DŮLEŽITÉ: Dokud zůstávají velké částice jako na obrázku A, pokračujte v třepání.

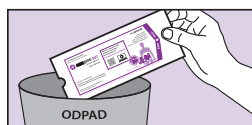

7 Lžičku vložte do původního obalu nebo ji zabalte do toaletního papíru a odhodte do odpadu.

DŮLEŽITÉ: Vzorek ke zpracování odešlete podle pokynů k odesílání samostatně dodaných poskytovatelem sady.

DNA genotek


*Vynikající vzorky
Osvědčené provedení*

Vyrobeno v Kanadě
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenetek.com
www.dnagenetek.com

*OMNIGENE je registrovaná ochranná známka společnosti DNA Genotek Inc.

Některé produkty společnosti DNA Genotek nemusí být dostupné ve všech geografických oblastech. Podrobnosti zjistíte u prodejního zástupce. Všechny protokoly, oficiální zprávy a informace k aplikaci společnosti DNA Genotek jsou k dispozici v sekci podpory na našich webových stránkách www.dnagenetek.com.

Patent (www.dnagenetek.com/legal/notice)

© 2018 DNA Genotek Inc., dceřiná firma společnosti OraSure Technologies, Inc., všechna práva vyhrazena.
PD-PR-00829 (CZ - Czech) Issue 1/2018-08