

Unitazo priedas OM-AC1

Naudojamas su „ OMNIGene®-GUT“


NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Šis unitazo priedas naudojamas su „OMNIGene®-GUT“ rinkiniu ir skirtas palengvinti fekalijų mėginių ėmimą.


Perspėjimas: SAUGOKITE, kad ant šio unitazo priedo nepatektų unitazo vandens, šlapimo, ploviklio ar oro gaiviklio.

Laikymo temperatūra: nuo 15 °C iki 25 °C


Procedūra:

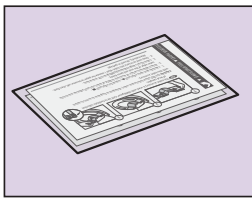


- 1 Pateikiami du unitazo priedai, jei kartais nepavyktų paimti mėginio pirmuoju bandymu.

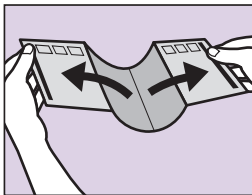

- 2 Atsargiai nulupkite pusę, pažymėtą ▲; pakartokite su pusę, pažymėta ■.

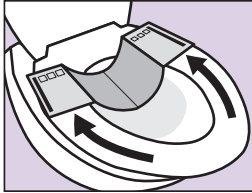

- 3 Lipniąją pusę priklijuokite priedą **unitazo sėdynės GALINĖJE dalyje**, kad lipnus paviršius būtų arti išorinio sėdynės krašto, ir tvirtai prispauskite.

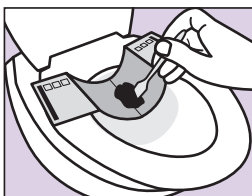

- 4 Paimkite fekalijų mėginį, vadovaudamiesi „OMNIGene-GUT“ naudojimo instrukcija.



- 5 Panaudotą priedą išmeskite į unitazą. Palaukite 1 minutę, kol popierius suminkštės, tada nuleiskite vandenį. Taip pat galite išmesti į šiukšlių dėžę.

1 minutė

DNA genotek



OM-AC1 pagamintas Nyderlanduose bendrovei „DNA Genotek Inc.“
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

*Puikūs mėginiai
Irodytas efektyvumas*

Tel. +1.613.723.5757
Faks. +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

„OMNIGene“ yra registruotasis „DNA Genotek Inc.“ prekės ženklas.
Kai kurie „DNA Genotek“ gaminiai gali būti tiekiami ne visuose geografiniuose regionuose;
išsamesnės informacijos teiraukitės savo pardavimo atstovo.
Visi „DNA Genotek“ protokolai, informaciniai dokumentai ir naudojimo pastabos pateikiamos mūsų svetainės www.dnagenotek.com pagalbos skyriuje.

Patentas (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 m., „DNA Genotek Inc.“ – „OraSure Technologies, Inc.“ patrunuojamoji bendrovė. Visos teisės saugomos.
PD-PR-00847 (LT - Lithuanian) Issue 1/2018-11

