


# OM-AC2 取樣匙配件

與  OMNIGene®-GUT 一併使用

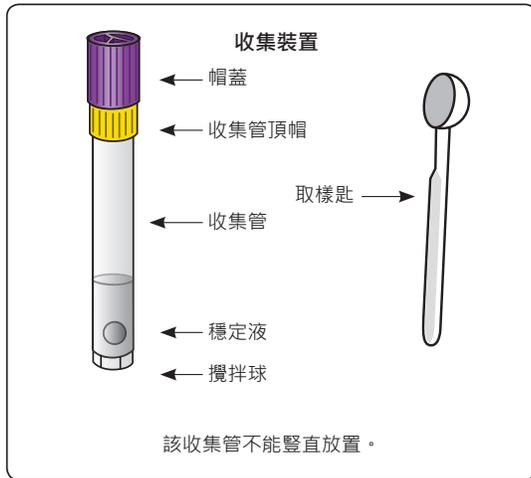

## 準備：

- 在收集之前請排空您的膀胱。
- 收集不包含任何尿液或馬桶水的糞便樣本。
- 可能會需要衛生紙或面巾紙。

## 套組概要和說明：

帶有取樣匙配件的 OMNIGene®-GUT 提供收集和穩定液態糞便樣本（嚴重腹瀉）中微生物 DNA 的材料和指導說明。

## 警告和注意事項：

- 僅限外用。
- 請勿將黃色頂帽從收集管上拆下。
- 請勿溢灑收集管中的穩定液。
- 若眼睛或皮膚接觸到該穩定液，請用水清洗。請勿吞食。
- 細小的物品可能會造成窒息危險。

儲存溫度：15°C 到 25°C

依照有關生物標本運輸的適用法規進行運送。詳見材料安全性數據表，網址為：[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

## 標籤圖例：

-  樣本收集者（使用者）
-  產品目錄號
-  製造商
-  15°C 到 25°C 儲存說明
-  請謹慎使用，參考使用說明
-  批號

## 使用說明

在收集之前請閱讀所有說明

### 程序：



- 1 重要的準備工作：**
- 在收集之前請排空您的膀胱。
  - 收集不包含任何尿液或馬桶水的糞便樣本。
  - 可能會需要衛生紙或面巾紙。




- 2** 在握住收集管黃色頂帽時，請僅擰開套組上的紫色帽蓋，並將其放在一旁待用。

**重要說明：**  
請勿拆下收集管黃色頂帽。  
請勿溢灑收集管中的穩定液。



- 3** 將一匙的液態糞便樣本轉移到黃色收集管頂帽。


**重要說明：**  
糞便樣本可能堵在黃色收集管頂帽。繼續到第 4 步。

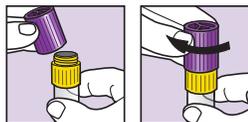

- 4** 拿起紫色帽蓋，讓其嵌固端向下並將其擰至黃色頂帽上，保證擰緊蓋牢。



- 5** 盡可能用力且快速的前後搖晃密封後的收集管，至少 30 秒。

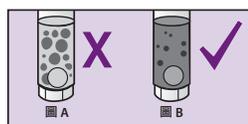

- 6** 這一糞便樣本將會與收集管內的穩定液相融合；但並非所有顆粒都會溶解。

**重要說明：**若大的顆粒如圖 A 所示仍未溶解，請繼續搖晃。



- 7** 請將取樣匙放入最初的包裝內或用衛生紙將其包起丟入垃圾桶。

**重要說明：**依照套組供應商提供的交付說明寄送樣本進行處理。

**DNA genotek**



加拿大產  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

電話：+1.613.723.5757  
傳真：+1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGene 是 DNA Genotek Inc. 的註冊商標。

一些 DNA Genotek 產品可能未在所有地理區域內提供，請聯繫您的銷售代表以獲取更多詳情。所有 DNA Genotek 協議、白皮書和使用說明書均可從我們的網站 ([www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)) 上的支援部分獲取。

專利 ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2019 年所有版權歸 DNA Genotek Inc. (OraSure Technologies, Inc. 的一家附屬公司) 所有。  
PD-PR-00917 (ZH - Traditional Chinese) Issue 1/2019-07