


OM-AC2 Lusikkatarvike

Käytetään yhdessä  **OMNIGENE®GUT**-sarjan kanssa

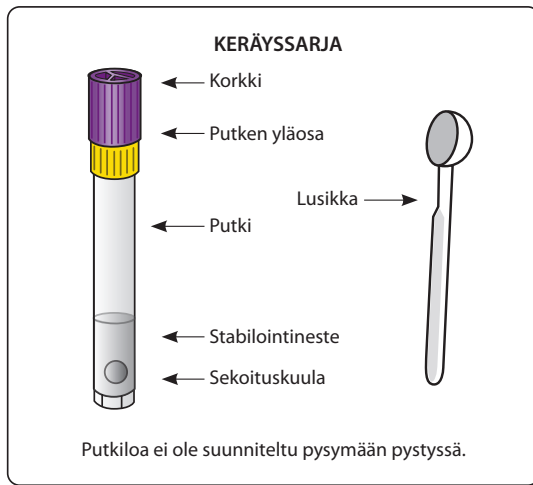

Valmistelu:

- Tyhjennä virtsarakko ennen näytteen ottoa.
- Kerää ulostenäyte, jossa ei ole virtsaa eikä WC-altaan vettä.
- WC-paperi tai -paperipyyhkeet voivat olla tarpeellisia.

Sarjan yhteenveto ja selitys:

OMNIGENE®GUT lusikkatarvikkeella tarjoaa materiaalit ja ohjeet mikrobien DNA:n keräykseen ja stabilointiin nestemäisestä ulostenäytteestä (vakava ripuli).






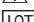
Varoitukset ja varoimet:

- VAIN ULKOISEEN KÄYTTÖÖN.
- ÄLÄ irrota putkesta sen keltaista yläosaa.
- ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.
- Pestävä vedellä, jos nestettä tai näytettä joutuu silmiin tai iholle. El saa niellä.
- Pienet esineet voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Varastointi: 15–25 °C

Lähetä biologisten näytteiden kuljetusta koskevien sovellettavien määristen mukaisesti. Katso käyttöturvallisuustiedote osoitteesta www.dnagenotek.com

Merkintöjen selitteet:

-  Kerää näyte ennen (käytä ennen)
-  Luettelonumero
-  Valmistaja
-  15°C–25°C Varastointiohjeet
-  Huomio, katso käyttöohjeet
-  Eränumero

KÄYTTÖOHJEET

Lue kaikki ohjeet ennen keräystä

Toimintaohje:



- 1 TÄRKEÄT VALMISTELUT:**
- Tyhjennä virtsarakko ennen näytteen ottoa.
 - Kerää ulostenäyte, jossa ei ole virtsaa eikä WC-altaan vettä.
 - WC-paperi tai -paperipyyhkeet voivat olla tarpeellisia.



- 2** Pidä kiinni putkilon keltaisesta yläosasta ja ruuvaa auki ainoastaan violetti korkki ja laita se sivuun myöhempää käyttöä varten.



TÄRKEÄÄ:


ÄLÄ irrota putken keltaista yläosaa.
ÄLÄ läikytä putkessa olevaa stabilointinestettä.




- 3** Siirrä **lusikallinen** nestemäistä ulostenäytettä keltaiseen putken korkkiin.

TÄRKEÄÄ:


Ulostenäyte ei saa virrata keltaisen putken korkin läpi. Jatka vaiheeseen #4.

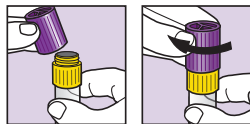

- 4** Ota violetti korkki käteen niin, että kiinteä puoli osoittaa alaspäin, ja kierrä se putken keltaiseen yläosaan tiiviisti kiinni.

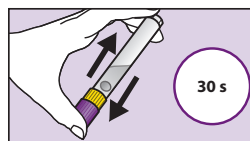

- 5** Ravista suljettua putkea lujasti ja nopeasti edestakaisella liikkeellä vähintään 30 sekunnin ajan.

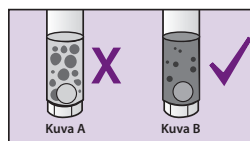

- 6** Ulostenäyte sekoittuu putkessa olevaan stabilointinesteeseen. Kaikki hiukkaset eivät liukene.

TÄRKEÄÄ: Jatka ravistamista, jos putkessa on edelleen suuria kiinteitä palasia, kuten kuvassa A.



- 7** Aseta lusikka alkuperäiseen pakkaukseen tai kääri WC-paperiin ja heitä roskiin.

TÄRKEÄÄ: Lähetä näyte käsittelyä varten noudattaen sarjan valmistajan toimittamia lähetysohjeita.

DNA genotek



Valmistettu Kanadassa
DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Korkealaatuiset näytteet
Todistettu suorituskyky*

Puh: +1.613.723.5757
Faksi: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGENE on DNA Genotek Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Osa DNA Genotekin tuotteita ei ehkä ole saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla. Lisätietoja saa myyntiedustajalta. Kaikki DNA Genotekin tutkimussuunnitelmat, viralliset julkaisut ja käyttöohjeet ovat saatavilla verkkosivustomme tukiosiossa osoitteessa www.dnagenotek.com.

Patentti (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2019 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies, Inc:n tytäryhtiö, kaikki oikeudet pidätetään.
PD-PR-00944 (FI - Finnish) Issue 1/2019-12