


# OM-AC2 Tillbehörssked

Används med  **OMNIGene®GUT**

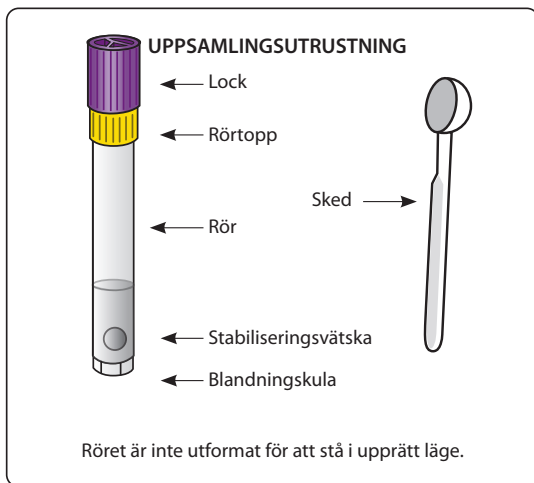

## Förberedelser:

- **Töm blåsan innan du börjar med uppsamlingen.**
- **Ta ett avföringsprov som inte innehåller urin eller toalettatten.**
- **Toalettpapper eller servetter kan behövas.**

## Sammanfattning och förklaring av kitet:

OMNIGene®GUT med tillbehörssked innehåller material och instruktioner för insamling och stabilisering av mikrobiellt DNA från flytande avföringsprov (svår diarré).






## Varning och försiktighetsåtgärder:

- ENDAST FÖR EXTERNT BRUK.
- Ta inte av den gula rörtoppen från röret.
- Spill inte stabiliseringsvätskan i röret.
- Tvätta med vatten om vätska eller prov kommer i kontakt med ögon eller hud. Intag INTE.
- Små föremål kan utgöra kvävningsskada.

**Förvaring:** 15°C till 25°C

Frakta i enlighet med gällande bestämmelser för transport av biologiska prover. Se MSDS på [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)


## Etikettförklaring:

-  Samla in prov senast (använd senast)
-  Katalognummer
-  Tillverkare
- 15°C / 25°C Förvaringsinstruktioner
-  Observera, läs bruksanvisning
-  Referensnummer

## BRUKSANVISNING

Läs alla instruktioner före provtagning

### Tillvägagångssätt:

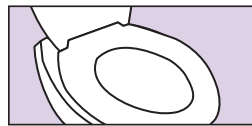

- 1 VIKTIGA FÖRBEREDELSE:**
- Töm blåsan innan du börjar med uppsamlingen.
  - Ta ett avföringsprov som inte innehåller urin eller toalettatten.
  - Toalettpapper eller servetter kan behövas.



- 2** Håll i den gula rörtoppen medan du skruvar av ENDAST det lila locket och sparar det till senare.



### VIKTIGT:


Ta inte av den gula rörtoppen från röret. Spill inte stabiliseringsvätskan i röret.



- 3** Överför **en sked** flytande avföringsprov till den gula rörtoppen.

### VIKTIGT:


Avföringsprovet får inte rinna igenom den gula rörtoppen. Fortsätt till steg 4.

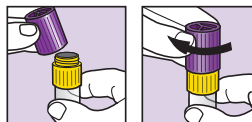

- 4** Plocka upp det lila locket med den solida sidan nedåt och skruva på det tills det sitter tätt på den gula rörtoppen.




- 5** Skaka det förslutna röret så hårt och snabbt som möjligt i minst 30 sekunder.

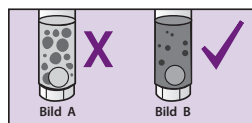

- 6** Avföringsprovet ska blandas med stabiliseringsvätskan i röret. Alla beståndsdelar kommer inte att lösas upp.

**VIKTIGT:** Fortsätt skaka om det återstår stora bitar som på bild A.

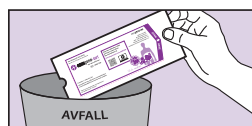

- 7** Lägg skeden i dess originalförpackning eller linda in den i toalettpapper och kasta den.

**VIKTIGT:** Skicka in provet enligt kitets medföljande leveransinstruktioner.

**DNA genotek**



Tillverkad i Kanada  
DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

*Optimal provtagning*  
*Dokumenterat hög kvalitet*

Tel: +1.613.723.5757  
Fax: +1.613.723.5057  
info@dnagenotek.com  
www.dnagenotek.com

\*OMNIGene är ett registrerat varumärke hos DNA Genotek Inc.  
Vissa DNA Genotek-produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Vänd dig till din säljrepresentant för mer information.  
Alla DNA Genotek-protokoll, vitböcker och tillämpningsuppgifter finns att få tag i på supportsidan på vår webbplats [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))  
© 2019 DNA Genotek Inc., ett dotterbolag till OraSure Technologies, Inc., alla rättigheter förbehålls.  
PD-PR-00946 (SV - Swedish) Issue 1/2019-12