


Opatrenia pri odbere vzorky:

Špongiová špička na NEMIE pred odberom dotknúť žiadneho povrchu.

Darca by NEMAL 30 minút pred odberom vzorky slín jesť, piť, fajčiť alebo žuť žuvačku.

Zamýšľané použitie: Na odber a stabilizáciu RNA z ľudskej vzorky slín

Obsah: Obsahuje 1 odberovú súpravu













Upozornenia a opatrenia: Nebezpečenstvo udusenía. Pri vkladaní špongie do úst je potrebná zvýšená opatrnosť.

Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou, opláchnite ich vodou. **NEPREHĽTAJTE.** Kartu bezpečnostných údajov MSDS nájdete na www.dnagenotek.com

Ukladanie: 15°C - 25°C

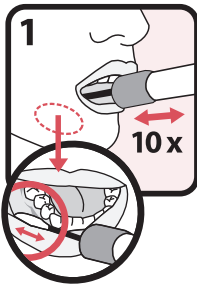
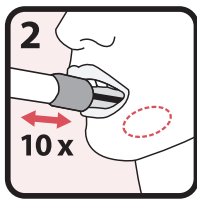

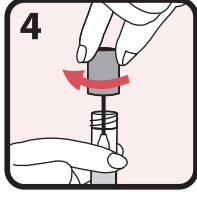
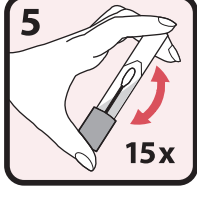
Súhrnné informácie a vysvetlenie k súprave: Produkt ORACollect-RNA je samoodberová súprava, ktorá zabezpečuje materiál a pokyny na odber ľudských vzoriek slín.

Legenda k štítku:

	Katalógové číslo
	Použitie len na predpis
	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
	Označenie CE
	Označenie UKCA
	Výrobca
	Zdravotnícka pomôcka
	Nepoužívajte opakovane
	Prečítajte si pokyny na použitie
	Spotrebujte do
	Číslo šarže
	Oprávnený zástupca

SLOVENSKY

Pokyny na odber vzorky:

	Otvorte balenie a vyberte odberovú tyčinku bez toho, aby ste sa dotkli špongiovej špičky. Vložte špongiu čo najhlbšie do úst, pokiaľ je to pohodlné, a potom ňou obtierajte o dolné dásna (ako na detailnom obrázku) pohybom dopredu a dozadu. jemne obtierajte o dásna 10-krát. Podľa možnosti sa vyhýbajte obtieraniu o zuby.
	jemne zopakujte obtieranie na opačnej strane ústnej dutiny pozdĺž dolných ďasien ďalších 10-krát.
	Skúmavku držte vzpriamene, aby sa stabilizačná tekutina nevyliala. Odsrutkujte uzáver z odberovej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli špongie.
	Obráťte uzáver naopak, vložte špongiu do skúmavky a pevne zaskrutkujte.
	Prevráťte uzavretú skúmavku a energicky zatrasťe 15-krát.



Na IVD (diagnostika in vitro), Rx (predpis) a na základe EUA (povolenia na núdzové použitie).

Táto pomôcka na odber vzoriek nebola povolená alebo schválená FDA.

Táto pomôcka na odber vzoriek bola povolená FDA na základe EUA.

Táto pomôcka na odber vzoriek bola povolená len na odber a zachovanie vzoriek slín na pomoc pri zistení nukleovej kyseliny zo SARS-CoV-2, nie na zisťovanie žiadnych iných vírusov alebo patogénov.

Táto pomôcka na odber vzoriek je povolená len počas platnosti vyhlásenia, že existujú okolnosti, ktoré odôvodňujú núdzové použitie diagnostiky in vitro na zistenie a/alebo diagnostiku COVID-19 podľa § 564(b)(1) Federálneho zákona o potravinách, liekoch a kozmetike, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), pokiaľ nebude toto povolenie zrušené alebo odvolané skôr.

DNAGENOTEK™

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Kvalitné vzorky • Overené vlastnosti

Bezplatné číslo (Severná Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holandsko

Zodpovedný subjekt za Spojené kráľovstvo: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Garant za Austráliu: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

ORACollect je registrovaná ochranná známka a DNA Genotek je ochranná známka spoločnosti DNA Genotek Inc. Niektoré produkty spoločnosti DNA Genotek nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach; podrobné informácie vám poskytne váš obchodný zástupca. Všetky protokoly, biele knihy a poznámky k použitiu produktov spoločnosti DNA Genotek sú k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii podpory na adrese www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., dcérska spoločnosť OraSure Technologies, Inc., všetky práva vyhradené.
PD-PR-01109 (SK - Slovak) Issue 1/2021-04