


INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Lea todas las instrucciones antes de la colección

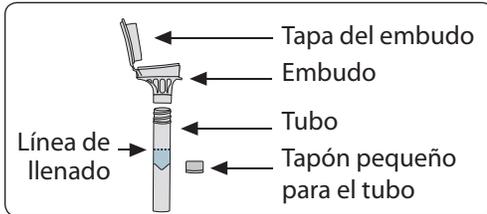

Precauciones para la colección:

NO ingiera alimentos ni bebidas, no fume ni mastique goma de mascar 30 minutos antes de obtener su muestra de saliva.

NO quite la película plástica de la tapa del embudo.

Este producto fue diseñado para la colección de ADN humano de muestras de saliva.

Contenido: El kit contiene líquido estabilizador.

Advertencias y precauciones: Enjuague con agua si el líquido estabilizador entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en www.dnagenotek.com.

Tapón pequeño, peligro de asfixia.

Almacenamiento: 15°C / 30°C

Resumen y explicación del kit:


Oragene-DISCOVER es un kit de autorrecolección que contiene los materiales y las instrucciones para coleccionar y estabilizar muestras de saliva.

Leyenda de la etiqueta:


	Consulte el prospecto del paquete
	Recoja la saliva antes del (fecha de caducidad)
REF	Número de catálogo
	Precaución: consulte las instrucciones de uso
15°C / 30°C	Instrucciones de almacenamiento
	Fabricante
LOT	Número de lote
SN	Número de serie

Procedimiento:


A la mayoría de las personas les lleva entre 2 y 5 minutos proporcionar una muestra de saliva siguiendo los pasos 1 a 5.

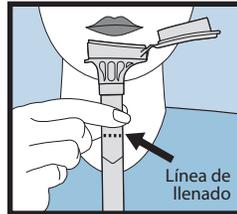


1 Escupa hasta que la cantidad de saliva líquida (no de burbujas) alcance la línea de llenado que se muestra en la figura n.º 1.

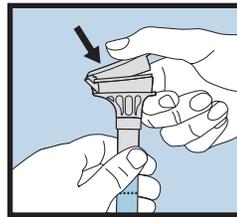


2 Sostenga el tubo en posición vertical con una mano. Cierre la tapa con la otra mano (como se muestra), empujándola con firmeza hasta que escuche un chasquido fuerte. El líquido de la tapa pasará al tubo para mezclarse con la saliva. Asegúrese de que la tapa esté correctamente cerrada.

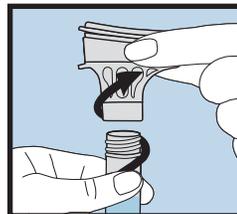

3 Sostenga el tubo en posición vertical. Desenrosque el embudo del tubo.

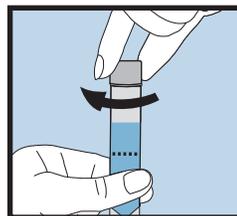

4 Utilice el tapón pequeño para cerrar el tubo herméticamente.

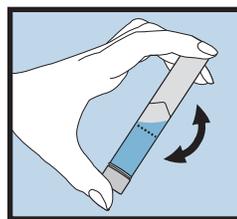

5 Agite el tubo tapado durante 5 segundos. Deseche o recicle el embudo.

Para investigación únicamente

No debe utilizarse en procedimientos de diagnóstico




Fabricado en Canadá
 DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Muestras de calidad superior
Eficacia comprobada

Tel.: +1.613.723.5757
 Fax: +1.613.723.5057
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com

Oragene[®]-DISCOVER es para uso exclusivo en investigación, no para procedimientos de diagnóstico.
 *Oragene es una marca registrada de DNA Genotek Inc.
 Es posible que no todos los productos de DNA Genotek estén disponibles en todas las regiones geográficas.
 Contacte con su representante de ventas para obtener más información.
 Todos los protocolos, reportes técnicos y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección "Support" de nuestro sitio web en www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)
 © 2017 DNA Genotek Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
 PD-PR-00427 (ES - Spanish) Issue 3/2017-05