

Instrucciones para la colección de muestras:

Precauciones para la colección:

Asegúrese de que el extremo del hisopo **NO** entre en contacto con ninguna superficie antes de la colección.

El donador **NO** deberá ingerir alimentos ni bebidas, fumar ni masticar goma de mascar 30 minutos antes de la colección de la muestra oral.

Este producto fue diseñado para la colección de muestras orales pediátricas humanas.

Contenido: El kit contiene líquido.

Advertencias y precauciones: El extremo del hisopo representa riesgo de asfixia. Tenga precaución al insertar el hisopo en la boca. Para la colección asistida de muestras no deje al niño solo.

Lave con agua si el líquido entra en contacto con los ojos o la piel. No lo ingiera.

Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) en www.dnagenotek.com.


Almacenamiento: 15 a 25 °C

Resumen y explicación del kit:


ORACollect es un kit que contiene los materiales y las instrucciones para recolectar muestras orales humanas.

Leyenda de la etiqueta:


	Fabricante
	Número de catálogo
	No-estéril
	Número de lote
	Recoja la muestra antes del (fecha de caducidad)
15°C a 25°C	Instrucciones de almacenamiento

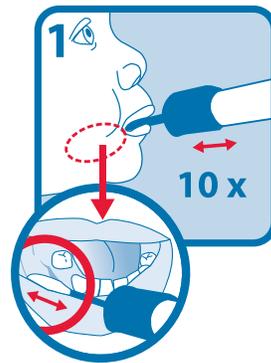


Abra el empaque y saque el colector sin tocar el extremo del hisopo. Coloque el hisopo en la boca lo más profundamente posible y frote las encías inferiores con movimientos hacia delante y atrás (vea la imagen ampliada). Frote suavemente las encías 10 veces. Si es posible, evite frotar sobre los dientes.

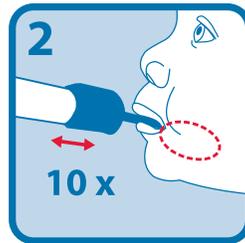


Repita suavemente los movimientos de frotación en el lado opuesto de la boca, sobre las encías inferiores, 10 veces más.

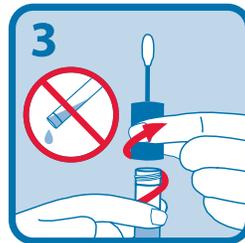

Sostenga el tubo en posición vertical para evitar que se derrame el líquido del interior del tubo. Desenrosque el tapón azul del tubo de colección sin tocar el hisopo.

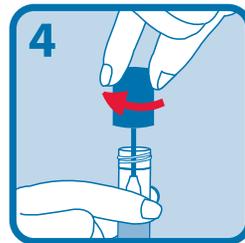

Invierta el tapón, inserte el hisopo en el tubo y ciérrelo herméticamente.

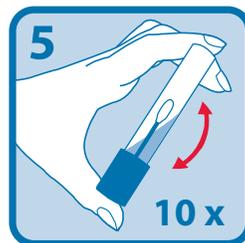

Invierta el tubo tapado y agítelo enérgicamente 10 veces.

Solo con fines de investigación

No utilizar para procedimientos de diagnóstico

DNAgenotek



Muestras de calidad superior
Eficacia comprobada

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canadá K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*ORACollect es una marca registrada de DNA Genotek Inc.

Es posible que no todos los productos de DNA Genotek estén disponibles en todas las regiones geográficas. Contacte con su representante de ventas para obtener más información.

Todos los protocolos, reportes técnicos y notas de aplicación de DNA Genotek están disponibles en la sección "Support" de nuestro sitio web en www.dnagenotek.com.

Patente (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2019 DNA Genotek Inc., una filial de OraSure Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
PD-PR-00659 (ES - Spanish) Issue 2/2019-10