

OM-AC1 WC-tartozék

Az  OMNigene®GUT-tal használatos


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ez a WC-tartozék az OMNigene®GUT készlettel együtt használatos székletminták gyűjtésére.


Vigyázat: NE kerüljön kapcsolatba ez a WC-tartozék a WC öblítővizével, vizelettel, tisztítószerral vagy WC-illatosítóval.

Tárolás: 15 °C - 25 °C


Eljárás:

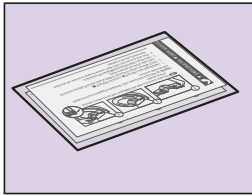


- 1** A készlet két WC-tartozékot tartalmaz arra az esetre, ha a mintagyűjtés az első próbálkozás alkalmával sikertelen lenne.

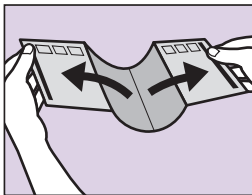


- 2** Óvatosan hajtsa ki a ▲-gel jelzett oldalt, majd a ■-tel jelzett oldalt.

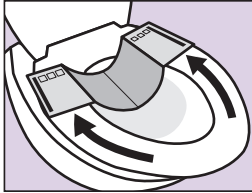

- 3** A ragasztós felületet tartsa a WC-ülőke HÁTSÓ RÉSZÉHEZ közel az ülőke külső széléhez, és óvatosan nyomja rá.

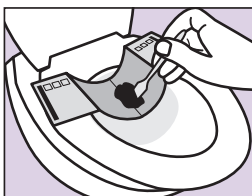

- 4** Végezze el a mintavételt az OMNigene®GUT használati útmutatójának alapján.

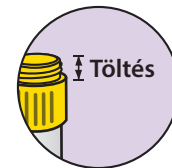

- 5** A használt tartozékot dobja a WC-be. Várjon egy percet, amíg a papír meglágyul, majd öblítse le. Egyéb esetekben dobja a szemétkébe.

1 perc

DNA genotek



Az OM-AC1 a DNA Genotek Inc. számára készített holland termék
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Kitűnő minták
Bevált teljesítmény

Tel.: +1.613.723.5757
Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

Az *OMNigene a DNA Genotek Inc. bejegyzett védjegye.

Egyes DNA Genotek termékek nem kaphatók mindenütt, további részletekért lépjen kapcsolatba viszonteladónkkal. Minden DNA Genotek protokoll, tanulmány, pályázati protokoll megtalálható weboldalunk "Támogatás" része alatt: www.dnagenotek.com.

Szabadalom (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 DNA Genotek Inc., az OraSure Technologies, Inc. leányvállalata, minden jog fenntartva.
PD-PR-00730 (HU - Hungarian) Issue 2/2018-11

