
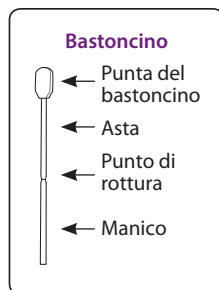


Leggere tutte le istruzioni prima della raccolta.

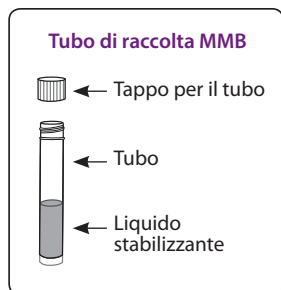

Preparazione:

- Lavare le mani con acqua e sapone prima di cominciare con la raccolta.
- Restare in piedi o sedersi in posizione comoda.

Avvertenze e precauzioni:






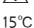


- NON raccogliere campioni durante il periodo mestruale.
- Se si notasse una lieve perdita o tracce di sangue sul bastoncino dopo la raccolta, si tratta di un evento normale che non deve destare preoccupazioni.
- Se si è in stato di gravidanza, consultare il proprio medico di fiducia prima di utilizzare il kit di raccolta.
- Lavare con acqua se il liquido stabilizzante venisse a contatto con gli occhi o con la pelle. NON ingerire.
- NON versare il liquido stabilizzante nel tubo di raccolta.
- NON poggiare la punta del bastoncino e impedirne il contatto con qualsiasi superficie, dopo averlo rimosso dalla confezione.
- Gli oggetti di piccole dimensioni possono comportare il rischio di soffocamento.

Conservazione: da 15° C a 25° C

Riepilogo e spiegazione del kit:


OMNigene-VAGINAL fornisce materiali e istruzioni per la raccolta e la stabilizzazione del DNA e RNA microbico da un campione vaginale.

Legenda dell'etichetta:

	Consultare l'insero della confezione
	Raccogliere il campione entro e non oltre (Utilizzare entro)
	Numero di catalogo
	Non riutilizzare
	Cautela, consultare le istruzioni per l'uso
	Istruzioni di conservazione
	Produttore
	Numero di lotto


ISTRUZIONI PER L'USO

Procedura:

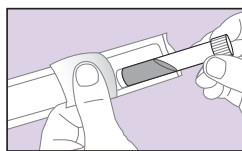

- 1** Localizzare il tubo di raccolta MMB contenente liquido stabilizzante e rimuovere il tubo dalla confezione.



Mettere il tubo da parte su una superficie pulita per l'uso successivo.

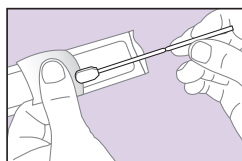

- 2** Rimuovere il bastoncino dalla confezione utilizzando il manico.

IMPORTANTE:


Tenere il bastoncino solo dal manico. NON toccare il bastoncino al di sopra del punto di rottura.

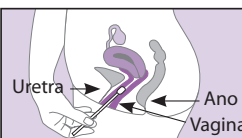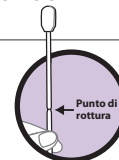

- 3** Aprire delicatamente le pieghe cutanee all'imbocco della vagina e inserire il bastoncino per 3-5 cm nella vagina.


IMPORTANTE:

NON piegare il bastoncino durante la raccolta.

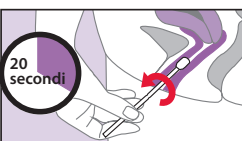

- 4** Muovere il bastoncino compiendo vari cerchi completi lungo le pareti vaginali per 20 secondi. Assicurarsi che il campione sia stato raccolto su tutti i lati della punta del bastoncino.


Rimuovere cautamente il bastoncino dalla vagina.

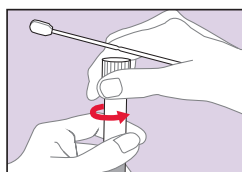

- 5** Mantenendo il bastoncino in una mano, svitare cautamente il tappo del tubo di raccolta contenente il liquido stabilizzante.


IMPORTANTE:

NON versare il liquido stabilizzante nel tubo. NON toccare alcuna altra superficie con la punta del bastoncino.

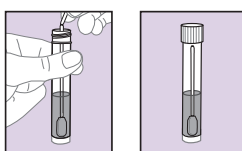

- 6** Inserire immediatamente il bastoncino nel fondo del tubo e spezzare l'asta in corrispondenza del punto di rottura.

La punta del bastoncino resta nel tubo di liquido.

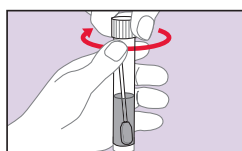

- 7** Riavvitare saldamente il tappo sul tubo.

Eliminare la confezione e il manico del bastoncino gettandoli nei rifiuti.

Inviare il campione per l'elaborazione seguendo le istruzioni di spedizione fornite dal produttore del kit.

Spedire in conformità ai regolamenti applicabili relativi al trasporto di campioni biologici. Vedere la SDS su www.dnagenotek.com

Solo a fine di ricerca
 Non utilizzare in procedure diagnostiche

DNAgenotek

Campioni di alta qualità
Performance dimostrata

Prodotto in Canada
 DNA Genotek Inc.
 3000 - 500 Palladium Drive
 Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tel: +1.613.723.5757
 Fax: +1.613.723.5057
 info@dnagenotek.com
 www.dnagenotek.com

OMNigene[®]VAGINAL è destinato solo a fine di ricerca, non utilizzare in procedure diagnostiche.

*OMNigene è un marchio commerciale registrato di DNA Genotek Inc.

Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni. Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del nostro sito Internet www.dnagenotek.com.

Brevetto (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2017 DNA Genotek Inc., una filiale di OraSure Technologies, Inc., tutti i diritti riservati.
 PD-PR-00759 (IT - Italian) Issue 1/2017-10