


Ettevaatusabinõud proovivõtmisel:

Veenduge, et kásna ots EI puutuks enne proovivõtmist kokku ühegi pinnaga.

Doonor EI tohi süüa, juua, suitsetada ega närimiskummi närida 30 minutit enne súljeproovi võtmist.

Kavandatud kasutus: RNA kogumine ja stabiliseerimine inimsúljje proovidest

Sisu: sisaldab 1 proovivõtukomplekti













Hoiatused ja ettevaatusabinõud: lämbumisoht. Kásna suhupanemisel tuleb olla ettevaatlik.

Peske veega, kui stabiliseeriv vedelik satub silma või nahale. MITTE alla neelata. Vt MSDS-i veebilehelt www.dnagenotek.com

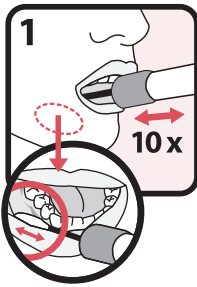
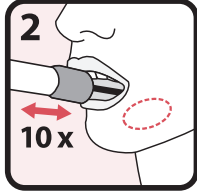
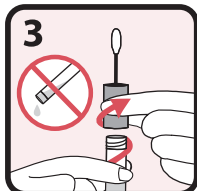
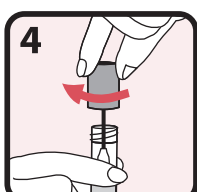
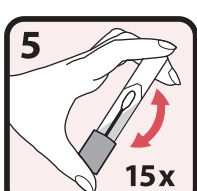
Säilitamine: 15 °C – 25 °C

Komplekti kokkuvõtlik selgitus: ORACollect-RNA on proovide isevõtmise komplekt, mis sisaldab materjale ja juhiseid inimsúljje proovide võtmiseks.

Etiketi tekst:

	Katalooginumber
	Kasutamiseks ainult retseptiga
	<i>In vitro</i> diagnostika meditsiiniseade
	CE-märgis
	UKCA-märgis
	Tootja
	Meditsiiniseade
	Ärge kasutage uuesti
	Tutvuge kasutusjuhendiga
	Kõlblik kuni
	Partii number
	Volitatud esindaja

EESTI KEEL
Juhised proovivõtmiseks:

	Avage pakend ja eemaldage kollektor ilma kásna otsa puudutamata. Lükake kásn nii kaugele suu tagaossa, kui teile mugav tundub, ja hõõruge sellega alumisi igemeid (vt lähivõte), liigutades kásna edasi-tagasi. Hõõruge igemeid õrnalt 10 korda. Kui võimalik, siis vältige hammaste hõõrumist.
	Korrake hõõrumisliigutusi õrnalt suu teise poole alumistel igemetel veel 10 korda.
	Hoidke tuubi püsti, et vältida tuubis oleva stabiliseeriva vedeliku väljavoolamist. Keerake proovivõtutuubi kork lahti ilma kásna puutumata.
	Keerake kork tagurpidi, sisestage kásn tuubi ja keerake kork kõvasti kinni.
	Keerake korgiga suletud tuub ümber ja loksutage seda jõuliselt 15 korda.



Kasutamiseks *in vitro* diagnostikas, retseptiga ja hädaolukorras kasutamise loaga.

See proovivõtuseade ei ole läbinud FDA kontrolli ja sel puudub FDA luba.

Sellele proovivõtuseadmele on väljastatud EUA kohane FDA luba.

Sellele proovivõtuseadmele on väljastatud luba ainult súljjeproovide kogumiseks ja säilitamiseks abivahendina SARS-CoV-2 nukleiinhappe ning mitte ühegi teise viiruse või patogeeni tuvastamiseks.

Selle proovivõtuseadme kasutamine on lubatud ainult ajaks, kui eksisteerivad asjaolud, mis õigustavad *in vitro* diagnostika hädaolukorras kasutamise luba COVID-19 tuvastamiseks ja/või diagnoosimiseks USA toidu-, ravimi- ja kosmeetikaseaduse (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) jaotise 564(b)(1) kohaselt, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), välja arvatud juhul, kui volitus lõpetatakse või tühistatakse varem.

DNAGENOTEK™
Paremad proovid • Tõestatud sooritus

DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Canada K2V 1C2

Tasuta telefon (Põhja-Ameerikas): 1.866.813.6354
Tel: +1.613.723.5757 • Faks: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com • www.dnagenotek.com

EC REF Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Madalmaad

Vastutav isik UKs: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Sponsor Austraalias: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austraalia

ORACollect on registreeritud kaubamärk ja DNA Genotek on kaubamärk, mis kuuluvad ettevõttele DNA Genotek Inc. On võimalik, et mõned DNA Genoteki tooted ei ole saadaval kõigis geograafilistes piirkondades; võtke täpsema teabe saamiseks ühendust müügiesindajaga. Kõik DNA Genoteki protokollid, lühiülevaated ja kasutamissoovitused on leitavad meie veebilehel www.dnagenotek.com kasutajatõe osast.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., OraSure Technologies Inc. tütarettevõtte, kõik õigused kaitstud.
PD-PR-01097 (ET - Estonian) Issue 1/2021-04