



Προφυλάξεις συλλογής:

Ο δωρητής ΔΕΝ πρέπει να φάει, να πει, να καπνίσει ή να μασήσει τσιγάρα για 30 λεπτά πριν από τη συλλογή του δείγματος σιέλου.

Βεβαιωθείτε ότι το σπογγώδες άκρο ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια πριν από τη συλλογή.

Προοριζόμενη χρήση: Το ORACollect[®]Dx προορίζεται για χρήση στη μη επεμβατική συλλογή δειγμάτων σιέλου. Το ανθρώπινο DNA από δείγμα σιέλου απομονώνεται, σταθεροποιείται και είναι κατάλληλο για χρήση σε μοριακές διαγνωστικές εφαρμογές που έχουν λάβει άδεια από τον FDA. Τα δείγματα σιέλου που συλλέγονται με τη χρήση του ORACollect-Dx σταθεροποιούνται και μπορούν να μεταφερθούν ή/και να αποθηκευτούν μακροπρόθεσμα σε συνθήκες περιβάλλοντος.











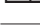
Περιεχόμενα: Το κιτ περιέχει σταθεροποιητικό υγρό.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

- Μόνο με ιατρική συνταγή. Για επαγγελματική χρήση.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη συλλογή του δείγματος. Τυχόν παρέκκλιση από αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές δείγμα και να επηρεάσει την απόδοση του DNA.
- Κίνδυνος πνιγμού. Απαιτείται προσοχή κατά την εισαγωγή του σπόγγου στη στοματική κοιλότητα.
- Οι δωρητές με ξηροστομία ενδέχεται να μην συλλέξουν επαρκές δείγμα με χρήση αυτών των οδηγιών το οποίο θα επιφέρει χαμηλότερη απόδοση DNA και μη έγκυρο δείγμα για χρήση.
- Πλύνετε με νερό εάν το υγρό σταθεροποίησης έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. ΜΗΝ καταπίνετε. Βλ. Δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) στη διεύθυνση www.dnagenotek.com

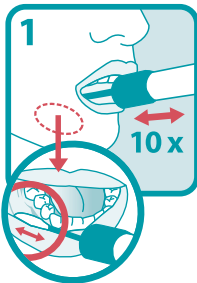
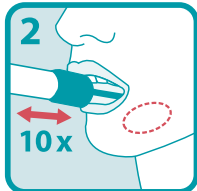

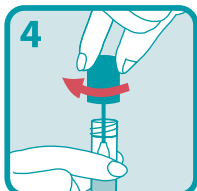
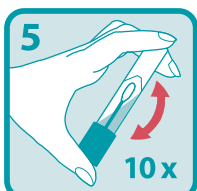
Αποθήκευση: 15°C-25°C

Υπόμνημα ετικέτας:

	Αριθμός καταλόγου
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν in vitro διαγνωστικής χρήσης
	Σήμανση CE
	Σήμανση UKCA
	Κατασκευαστής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Συλλογή δείγματος έως (Ημερομηνία λήξης)
	Αριθμός παρτίδας
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαδικασία λήψης δείγματος σιέλου:

	<p>Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τον συλλέκτη χωρίς να ακουμπήσετε το σπογγώδες άκρο. Τοποθετήστε τον σπόγγο στη στοματική κοιλότητα όσο πιο βαθιά γίνεται χωρίς να προκαλεί δυσφορία και τρίψτε κατά μήκος των κάτω ούλων (βλ. κοντινό εικόνας) με κινήσεις μπρος-πίσω. Τρίψτε απαλά τα ούλα 10 φορές. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε το τρίψιμο των δοντιών.</p>
	<p>Επανάλαβετε το τρίψιμο με απαλές κινήσεις προς την αντίθετη πλευρά του στόματος κατά μήκος των κάτω ούλων για 10 φορές ακόμα.</p>
	<p>Κρατήστε το σωληνάριο σε όρθια θέση για να μην βγει το σταθεροποιητικό υγρό από το σωληνάριο. Ξεβιδώστε το μπλε πώμα από το σωληνάριο συλλογής χωρίς να ακουμπήσετε τον σπόγγο.</p>
	<p>Γυρίστε το πώμα ανάποδα, εισαγάγετε τον σπόγγο στο σωληνάριο και κλείστε σφιχτά το πώμα.</p>
	<p>Αναστρέψτε το σωληνάριο με το πώμα και ανακινήστε έντονα 10 φορές.</p>



Για in vitro διαγνωστική χρήση

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Κάτω Χώρες

Αρμόδιο άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Αυστραλός χορηγός: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Αυστραλία

Το ORACollect αποτελεί καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και το DNA Genotek αποτελεί εμπορικό σήμα της DNA Genotek Inc. Ορισμένα προϊόντα της DNA Genotek ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Όλα τα πρωτόκολλα, οι λευκές βιβλίοι και οι σημειώσεις εφαρμογής της DNA Genotek διατίθενται στην ενότητα υποστήριξης του ιστοτόπου μας στη διεύθυνση www.dnagenotek.com.

DNAGENOTEK™

Ανώτερη δείγματα
Αποδεδειγμένη απόδοση