



Opatrenia pri odbere vzorky:

Darca by NEMAL 30 minút pred odberom vzorky slín jesť, piť, fajčiť alebo žuť žuvačku.

Špongiová špička na NEMIE pred odberom dotknúť žiadneho povrchu.

Zamýšľané použitie: Produkt ORACollect[®]Dx je určený na neinvazívny odber vzoriek slín. Ľudská vzorka DNA zo vzorky slín je izolovaná, stabilizovaná a vhodná na použitie pri molekulárnych diagnostických aplikáciách schválených FDA. Vzorky slín odobraté pomocou ORACollect[®]Dx sú stabilizované a môžu sa prepravovať a/alebo uskladniť dlhodobo pri bežnej teplote prostredia.












Obsah: Súprava obsahuje stabilizačnú tekutinu.

Upozornenia a opatrenia:

- Len na predpis. Na profesionálne použitie.
- Pred odberom vzorky si dôkladne prečítajte všetky pokyny; pri nedodržaní postupu nemusí byť vzorka dostatočná a ovplyvní to získanie DNA.
- Nebezpečenstvo udusenía. Pri vkladaní špongie do úst je potrebná zvýšená opatrnosť.
- Ak darca trpí na xerostómiu (sucho v ústach), nemusí sa podariť odobrať dostatočnú vzorku podľa týchto pokynov, takže vzorka bude obsahovať menej DNA a nebude platná na použitie.
- Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou, opláchnite ich vodou. **NEPREHÁTAJTE.** Kartu bezpečnostných údajov MSDS nájdete na www.dnagenotek.com

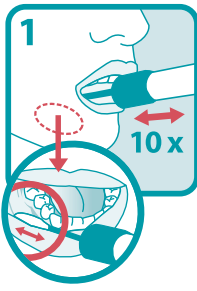


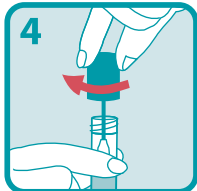
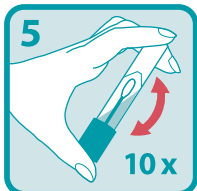
Uskladnenie: 15°C - 25°C

Legenda k štítku:

	Katalógové číslo
	Zdravotnícka diagnostická pomôcka in vitro
	Označenie CE
	Označenie UKCA
	Výrobca
	Zdravotnícka pomôcka
	Nepoužívajte opakovane
	Prečítajte si pokyny na použitie
	Vzorku odoberte do (Spotrebujte do)
	Číslo šarže
	Oprávnený zástupca

SLOVENSKY

Postup na odber vzorky slín:

	<p>Otvorte balenie a vyberte odberovú tyčinku bez toho, aby ste sa dotkli špongiovej špičky. Vložte špongiu čo najhlbšie do úst, pokiaľ je to pohodlné, a potom ňou obtierajte o dolné dásna (ako na detailnom obrázku) pohybom dopredu a dozadu. Jemne obtierajte o dásna 10-krát. Podľa možnosti sa vyhýbajte obtieraniu o zuby.</p>
	<p>Jemne zopakujte obtieranie na opačnej strane ústnej dutiny pozdĺž dolných ďasien ďalších 10-krát.</p>
	<p>Skúmavku držte vzpriamene, aby sa stabilizačná tekutina nevyliala. Odskrutkujte modrý uzáver z odberovej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli špongie.</p>
	<p>Obráťte uzáver naopak, vložte špongiu do skúmavky a pevne zaskrutkujte.</p>
	<p>Prevráťte uzavretú skúmavku a energicky zatrasťte 10-krát.</p>



Na diagnostické použitie in vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holandsko
Zodpovedný subjekt za Spojené kráľovstvo: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Garant za Austráliu: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

ORACollect je registrovaná ochranná známka a DNA Genotek je ochranná známka spoločnosti DNA Genotek Inc. Niektoré produkty spoločnosti DNA Genotek nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach; podrobné informácie vám poskytnie váš obchodný zástupca. Všetky protokoly, biele knihy a poznámky k použitiu produktov spoločnosti DNA Genotek sú k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii podpory na adrese www.dnagenotek.com.

Patent (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2021 DNA Genotek Inc., dcérska spoločnosť OraSure Technologies, Inc., všetky práva vyhradené.
PD-PR-01140 (SK - Slovak) Issue 2/2021-04

DNAGENOTEK™

*Kvalitné vzorky
Overené vlastnosti*

■ DNA Genotek Inc.
3000 - 500 Palladium Drive
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Bezplatné číslo (Severná Amerika): 1.866.813.6354
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com