



### Opatrenia pri odbere vzorky:

**Darca by NEMAL 30 minút pred odberom vzorky slín jesť, piť, fajčiť alebo žuť žuvačku.**

**Špongiová špička na NEMIE pred odberom dotknúť žiadneho povrchu.**

**Zamýšľané použitie:** Produkt ORAcollect®·Dx je určený na neinvazívny odber vzoriek slín. Ľudská vzorka DNA zo vzorky slín je izolovaná, stabilizovaná a vhodná na použitie pri molekulárnych diagnostických aplikáciách schválených FDA. Vzorky slín odobraté pomocou ORAcollect·Dx sú stabilizované a môžu sa prepravovať a/alebo uskladniť dlhodobo pri bežnej teplote prostredia.












**Obsah:** Súprava obsahuje stabilizačnú tekutinu.

### Upozornenia a opatrenia:

- Len na predpis. Na profesionálne použitie.
- Pred odberom vzorky si dôkladne prečítajte všetky pokyny; pri nedodržaní postupu nemusí byť vzorka dostatočná a ovplyvní to získanie DNA.
- Nebezpečenstvo udusenía. Pri vkladaní špongie do úst je potrebná zvýšená opatrnosť.
- Ak darca trpí na xerostómiu (sucho v ústach), nemusí sa podariť odobrať dostatočnú vzorku podľa týchto pokynov, takže vzorka bude obsahovať menej DNA a nebude platná na použitie.
- Ak sa stabilizačná tekutina dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou, opláchnite ich vodou. **NEPREHÁTAJTE.** Kartu bezpečnostných údajov MSDS nájdete na [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)

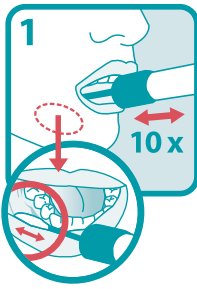
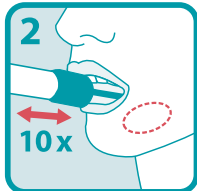

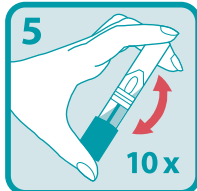
**Uskladnenie:** 15°C - 25°C

### Legenda k štítku:

	Katalógové číslo
	Zdravotnícka diagnostická pomôcka in vitro
	Označenie CE
	Označenie UKCA
	Výrobca
	Zdravotnícka pomôcka
	Nepoužívajte opakovane
	Prečítajte si pokyny na použitie
	Vzorku odoberte do (Spotrebujte do)
	Číslo šarže
	Oprávnený zástupca

## SLOVENSKY

### Postup na odber vzorky slín:

	<p>Otvorte balenie a vyberte odberovú tyčinku bez toho, aby ste sa dotkli špongiovej špičky. Vložte špongiu čo najhlbšie do úst, pokiaľ je to pohodlné, a potom ňou obtierajte o dolné dásna (ako na detailnom obrázku) pohybom dopredu a dozadu. Jemne obtierajte o dásna 10-krát. Podľa možnosti sa vyhýbajte obtieraniu o zuby.</p>
	<p>Jemne zopakujte obtieranie na opačnej strane ústnej dutiny pozdĺž dolných ďasien ďalších 10-krát.</p>
	<p>Skúmavku držte vzpriamene, aby sa stabilizačná tekutina nevyliala. Odskrutkujte modrý uzáver z odberovej skúmavky bez toho, aby ste sa dotkli špongie.</p>
	<p>Obráťte uzáver naopak, vložte špongiu do skúmavky a pevne zaskrutkujte.</p>
	<p>Prevráťte uzavretú skúmavku a energicky zatrasťte 10-krát.</p>



Na diagnostické použitie in vitro



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holandsko  
Zodpovedný subjekt za Spojené kráľovstvo: Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 – UL International, Compass House, Vision Park Histon, Cambridge, CB24 9BZ

Garant za Austráliu: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000 Austrália

ORAcollect je registrovaná ochranná známka a DNA Genotek je ochranná známka spoločnosti DNA Genotek Inc. Niektoré produkty spoločnosti DNA Genotek nemusia byť dostupné vo všetkých geografických oblastiach; podrobné informácie vám poskytnie váš obchodný zástupca. Všetky protokoly, biele knihy a poznámky k použitiu produktov spoločnosti DNA Genotek sú k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii podpory na adrese [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com).

Patent ([www.dnagenotek.com/legalnotices](http://www.dnagenotek.com/legalnotices))

© 2021 DNA Genotek Inc., dcérska spoločnosť OraSure Technologies, Inc., všetky práva vyhradené.  
PD-PR-01208 (SK - Slovak) Issue 1/2021-04

**DNAGENOTEK™**

*Kvalitné vzorky  
Overené vlastnosti*

■ DNA Genotek Inc.  
3000 - 500 Palladium Drive  
Ottawa, ON, Kanada K2V 1C2

Bezplatné číslo (Severná Amerika): 1.866.813.6354  
Tel.: +1.613.723.5757 • Fax: +1.613.723.5057  
[info@dnagenotek.com](mailto:info@dnagenotek.com)  
[www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com)